

SVENSKA



FOR THE FREEDOM
OF EVERY BODY

GRAVIDITETSTEST TESTA TIDIGT

Med RFSU Graviditetstest Testa Tidigt kan du själv snabbt och enkelt ta reda på om du är gravid.

- Du kan ta testet redan 6 dagar innan utebliven menstruation.
- Testets känslighet är 10 mIU/ml av hormonet hCG (human Chorionic Gonadotropin) i urinen.
- Testet ger mer än 99% säkert resultat från dagen då du väntar din mens.

Vill du veta mer om graviditet eller har frågor om våra produkter, läs mer på [rfsu.com](#).

Läs instruktionerna noggrant!

Avsedd användning
Själv-test avsedd för detektion av hCG (Human Chorionic Gonadotropin) i urin för tidigt upptäck av graviditet.

Avsedd användare
För hemmabruk till kvinnor i fertil ålder.

Innehåll

- Förpackning: foliepåse, bruksanvisning
- Foliepåse: 1st teststicka, 1st torkmedel

Material som behövs men inte ingår
Timer och uppsamlingskopp.

Avsedd användning
Själv-test avsedd för detektion av hCG (Human Chorionic Gonadotropin) i urin för tidigt upptäck av graviditet.

Avsedd användare
För hemmabruk till kvinnor i fertil ålder.

Innehåll

- Förpackning: foliepåse, bruksanvisning
- Foliepåse: 1st teststicka, 1st torkmedel

Material som behövs men inte ingår
Timer och uppsamlingskopp.

FRÅGOR & SVAR

När kan jag testa?
Du kan börja göra testet redan 6 dagar innan utebliven menstruation, vilket är 5 dagar innan förväntad menstruation*. Har du oregelbunden mens, testa med hänsyn till den längsta menstruationscykeln du haft de senaste månaderna. Om du testar tidigt innan förväntad menstruation och testet visar ett negativt eller svagt positivt resultat rekommenderas att testa igen efter 2 dagar. I tabellen nedan visas % av graviditetstest från läbstestning av tidiga graviditetstester. Du kan testa när som helst under dagen, men säkrast är att mäta morgonurinen.

***Tabell**

Första dagen du kan börja testa									
Antal dagar före utebliven menstruation	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0		
Antal dagar före förväntad menstruation	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1		
% av detekterade graviditeter	75%	95%	≥95%	≥99%	≥99%	≥99%	≥99%		

Vad ska jag göra om testet visar att jag är gravid?
Ett positivt testresultat visar att hCG har identifierats i din urin på en nivå över 10 mIU/ml. Ta kontakt med din barnmorska eller gynekolog och boka tid för rådgivning och kontroll.

Vad ska jag göra om testet visar att jag inte är gravid?
Ett negativt testresultat visar att ingen hCG har identifierats i din urin eller att koncentrationen av hCG är för låg för att upptäckas av testet (under 10 mIU/ml). I en vanlig menscykel kommer blödnngen vanligtvis 12-14 dagar efter ägglossningen. Tiden från första blödningsdag till ägglossning kan dock variera mer och det är detta som ibland ger upphov till oregelbunden mens. Om testet visar negativt kan det bero på att din ägglossning ägde rum senare än du tror. Om du testade tidigt bör du testa igen vid väntad mens. Om din mens är sen ska du testa igen om ca 1 vecka. Om du

Försiktighetsåtgärder!

- Förvaras ömtåmligt för barn.
- Får inte frysas.
- Als bruksanvisningen noga före användning. Om instruktionen inte följs i detalj, kan utfallet bli felaktigt.
- Använd inte testet efter utgångsdatum eller om folieomslaget verkar skadat.
- Teststicka ska ha rumstemperatur vid användning. Efter öppnande bör teststickan användas inom 1 timme.
- Endast nygen taget urinprov bör användas. Urinen kan förvaras i kylskåp (+2-8 °C) 148 h.
- Enheten innehåller små delar, t.ex. torkmedel, som inte får sväljas.
- Testet är enbart avsedd för utvärtes bruk och varje teststicka för engångsbruk. Får ej förtäras.
- Tillverkaren och den behöriga myndigheten skall informeras om alla allvarliga tillbud som är förknippad med produkten.

Testets begränsningar

- Testet ska användas för att identifiera hCG i urinprov.
- Koncentrationen av hCG i urinprovet kan inte bedömas med hjälp av testlinjen och kontrollinjens färgstyrka och mättnad.

- hCG kan detekteras i urin och ge falskt positivt svar flera veckor efter genomgången förlösning, kejsarsnitt eller abort.
- Patienter med livmodertumör eller som genomgått klimakteriet kan uppvisa felaktigt positivt resultat på grund av hög koncentration av hCG i urinen.
- Det finns vissa situationer som kan påverka testresultatet: vissa mediciner, myom i livmodern, menopaus/klimakteriet, ökad koncentration av hormoner så som LH, FSH och TSH etc. Detsamma gäller för vissa ovanliga sjukdomar eller om du urin innehåller stora mängder bakterier. Kontakta din barnmorska eller gynekolog om du får oväntade eller inkonsekventa resultat.
- Ektopisk graviditet (utomlivshavandeskap) och cystor på äggstockarna kan ge felaktiga resultat. Vissa sjukdomar och cancerformer (t.ex. livmodercancer) kan påverka testresultatet. Om du lider av en sådan sjukdom bör du uppsöka läkare innan du utför ett graviditetstest.
- P-piller, smärtstillande medel, antibiotika eller hormonal behandlingar som ej innehåller hCG bör ej påverka testresultatet.
- Slutliggig graviditetsbesked kan endast ges av barnmorska, läkare eller gynekolog.

PRESTANDAEGENSKAPER

1. Analytisk känslighet (LoD)
LoD (detektionsgräns) för graviditetstest (Midstream) är 9,65 mIU/ml.

2. "Hook effect" vid hög dos
Den höga dosen dvs hook effect hittades inte upp till 200 000 mIU/ml hCG koncentration för graviditetstest.

3. Analytisk specificitet
Det observerades ingen korsreaktivitet under nedan tre situationer.

- Koncentrationen av LH i provet (negativt eller positivt) var 500 mIU/ml.
- Koncentrationen av FSH i provet (negativt eller positivt) var 1000 mIU/ml.
- Koncentrationen av TSH i provet (negativt eller positivt) var 1000 mIU/ml.

4. Precision
Ingen inkonsekvens mellan replikerade testresultat från samma koncentration.

5. Utredning av interferensämnen

Substance	Concentration	Substance	Concentration
Acetaminophen	15,6 mg/dL	Albumin	6 mg/dL
Ascorbic Acid	5,25 mg/dL	Glucose	1000 mg/dL
Pseudoephedrine	0,33 mg/dL	Ampicillin	7,5 mg/dL
Salicylic Acid	2,86 mg/dL	Amoxicillin	5,40 mg/dL
Acetylsalicylic Acid	3,00 mg/dL	Ethanol	600 mg/dL
Cocaine	0,141 mg/dL	Ibuprofen	21,9 mg/dL

Det fanns ingen interferensreaktivitet för prover som innehöll de ovan listade interferenter. Urinprovets förändringar (pH från 4 till 9) och specifit gravitation (1,000-1,035) påverkade inte heller resultaten.

6. Gränsvärde
Gränsvärdet för graviditetstest (Midstream) är 10 mIU/ml. Om hCG-koncentrationen i provet var över 10 mIU/ml, kan provet bestämmas som positivt.

7. Klinisk prestanda
Positiv sammanträffandefrekvens: 54/(54+0) × 100 % = 100 %
(95 % KI: 93,36 % - 100,00 %). Negativ sammanträffandefrekvens: 46/(10+46) × 100 % = 100 %
(95 % KI: 92,29 % - 100,00 %). Total sammanträffandefrekvens: (54+46)/100 × 100 % = 100 %
(95 % KI: 96,30 % - 100,00 %).

**FOR THE FREEDOM
OF EVERY BODY**


BY CHOOSING RFSU PRODUCTS
YOU SUPPORT OUR ONGOING WORK
FOR SEXUAL AND HUMAN RIGHTS.



SÅ HÄR GÖR DU TESTET

Du kan testa när som helst under dygnet redan 6 dagar innan utebliven menstruation, vilket är 5 dagar innan förväntad menstruation*, men säkrast är att mäta morgonurinen då hCG-koncentrationen är som högst.

När du har läst instruktionerna och är redo att utföra testet tar du ut graviditetstestet ur innerförpackningen. Använd teststickan med en gång.

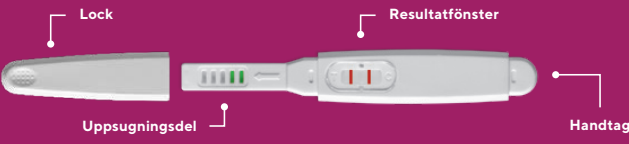

STEG 1: UTFÖR TESTET


A **Testa direkt i urinstrålen.** Håll teststickan med uppsugningsdelen riktad nedåt i urinstrålen i 10 sekunder. Se till att det inte kommer urin på resultatfönstret.

B **Eller samla ett urinprov i en ren, torr behållare.** Doppa ner hela uppsugningsdelen i urinen i 20 sekunder. Låt inte urinrinnvån stiga över teststickans plastlejlje.



STEG 2: VÄNTA 1-5 MIN

- Sätt tillbaka locket och lägg teststickan på en plan och torr yta med resultatfönstret uppåt.
- Vänta 1-5 minuter innan du läser av resultatet och låt teststickan ligga helt still.
- När teststickan börjar reagera färgas hela resultatområdet ljust rosa.

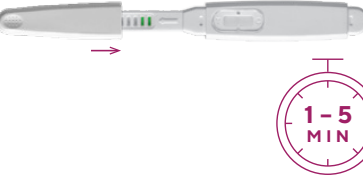

STEG 3: LÄS AV RESULTATET

Läs av resultatet så snart som möjligt inom 1-5 minuter, läs inte av några resultat efter 5 minuter då detta kan ge missvisande resultat.

(T) Testlinje **(C) Kontrolllinje**



Positivt resultat – Gravid

Två tydliga röda/rosa linjer visas i resultatområdet. Om du ser två tydliga röda/rosa linjer betyder det att du högst sannolikt är gravid. Färgnyansen och färgstyrkan på testlinjen (T) kan variera eftersom olika stadier av graviditet har olika koncentrationer av hCG-hormon. Om du testar tidigt eller är osäker är det bra att testa på nytt 2 dagar senare, helst med den första morgonurinen. Om du är gravid, kontakta barnmorska eller gynekolog för rådgivning.




Negativt resultat – Inte gravid

Om endast kontrollinjen visas i resultatområdet är du inte gravid. Om du ändå inte får din menstruation, gör ett nytt test efter 2 dagar, helst med den första morgonurinen. Får du samma resultat och inte fått din menstruation kontakta barnmorska eller gynekolog.

Ogiltigt resultat

Om ingen kontrollinje (C) är synligt, inga linjer alls visas eller om linjerna har annan färg än röda/rosa, har testet inte fungerat som det ska. Det kan bero på att uppsugningsdelen inte har sugit upp tillräckligt mycket urin eller att du inte har utfört testet på rätt sätt. Gör ett nytt test.

Ibland kan testlinjen (T) vara synlig i en grå/vit nyans. Testet är positivt först när testlinjen (T) syns tydligt i en röd/rosa färgnyans.

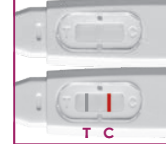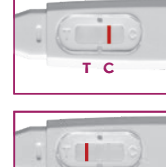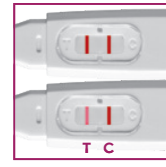

Ätervinn! Sortera förpackningen som papperförpackning, foliepåse som plast, släng använd teststicka i vanliga hushållsopor.

Art nr: I3710XA V2501:01

RFSU AB, Box 1279, Färögatan 33, 164 51 Kista, Sverige, [www.rfsu.com](#).

SYMBOLFÖRKLARING

- IVD In vitro-diagnostisk medicinteknisk produkt
- Endast för engångsbruk
- Läs bruksanvisning före användning
- Tillverkare
- Utgångsdatum
- Produktionsbatchnummer
- Temperaturgränser
- CE-merking

0537

RFSU AB, Box 1279, Färögatan 33, 164 51 Kista, Sverige, [www.rfsu.com](#).

CE

0537

SUOMI



FOR THE FREEDOM
OF EVERY BODY

RASKAUSTESTI TESTAA VARHAIN

RFSU:n Raskaustestin Testaa Varhain avulla voit nopeasti ja vaivattomasti itse selvittää, oletko raskaana.

- Voit tehdä testin jo 6 päivää ennen kuukautisten poisjäämistä.
- Testi mittaa koriongonadotropiini (hCG) -hormonin pitoisuutta virtsassa, ja sen herkkyys on 10 mIU/ml.
- Testi antaa yli 99-prosenttisesti varman tuloksen kuukautisten odotetusta alkamispäivästä lähtien.

Jos haluat tietää lisää raskaaksi tulemisesta ja hedelmällisyydestä tai jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme, lue lisää osoitteesta [rfsu.com](#).

Luethan ohjeet huolellisesti!

Mihin tuote on tarkoitettu
Kotona tehtävä raskaustesti on tarkoitettu raskauden varhaiseen toteamiseen havaitsemalla virtsassa oleva koriongonadotropiini (hCG) -hormoni.

Kenelle tuote on tarkoitettu
Hedelmällisessä iässä oleville naisille kotikäyttöön.

Sisältö

- Folio pussi, käyttöohje
- Folio pussi: 1 testitikut, 1 kosteudenpoistaja

Muut testauksessa tarvittavat materiaalit
Ajastin ja keraussäsa.

Mihin tuote on tarkoitettu
Kotona tehtävä raskaustesti on tarkoitettu raskauden varhaiseen toteamiseen havaitsemalla virtsassa oleva koriongonadotropiini (hCG) -hormoni.

Kenelle tuote on tarkoitettu
Hedelmällisessä iässä oleville naisille kotikäyttöön.

Sisältö

- Folio pussi, käyttöohje
- Folio pussi: 1 testitikut, 1 kosteudenpoistaja

Muut testauksessa tarvittavat materiaalit
Ajastin ja keraussäsa.

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

Milloin voin tehdä testin?
Voit tehdä testin 6 päivää ennen kuukautisten poisjäämistä, eli 5 vuorokautta ennen kuukautisten odotettua alkamisajankohtaa*. Jos kuukautiset ovat epäsäännölliset, ota testatessa huomioon viimeisimpien kuukautistesi pisin kierto. Jos testaat ennen kuukautisten odotettua alkamisajankohtaa, ja mikäli testi näyttää negatiivista tai heikkoa positiivista tulosta, suosittelemme että teet uuden testin parin päivän päästä. Alla oleva taulukko näyttää %-osuudet raskaudesta, jotka on tällä testillä todettu aikaisessa vaiheessa laboratoriotesteissä. Testin voi tehdä mihin vuorokaudenalkaan tahansa, mutta aamuvirtsasta mittaminen on varmint.

***Taulukko**

	Ensimmäinen päivä, jolloin voit testata						
Päivien lukumäärä ennen kuukautisten poisjäämistä	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
Päivien lukumäärä ennen kuukautisten odotettua alkamisajankohtaa	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1
Raskauden tunnistamisprosentti	75%	95%	≥95%	≥99%	≥99%	≥99%	≥99%

Mitä minun tulee tehdä, jos testi näyttää, etten ole raskaana?
Negatiivinen testitulos tarkoittaa, ettei testi ole havainnut virtsassasi hCG-hormonia, tai että hCG-pitoisuus on liian alhainen testillä havaittavaksi (alle 10 mIU/ml). Tavallisessa kuukautiskierrossa vuodet tulevat normaalisti 12-14 päivää munasulun irtoamisen jälkeen. Ensimmäisestä vuotopäivästä munasulun irtoamisen kulua aika voi kuitenkin vaihdella, ja se on joskus syy epäsäännöllisiin kuukautisiin. Jos testin tulos on negatiivinen, se voi johtua munasulun luultua myöhemmästä irtoamisajankohdasta. Jos testisit aikaisin, testaa uudelleen silloin, kun kuukautistesi olisi pitänyt alkaa. Jos kuukautisesi ovat myöhässä, testaa uudelleen noin 1 viikon kuluttua. Jos testi antaa uudelleen negatiivisen tuloksen, mutta kuukautisesi

Turvallisuustoimienpiteutt!

- Säilytetävä lasten ulottumattomissa.
- Älä pakasta.
- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Jos ohjeita ei noudateta huolellisesti, seurauksena voi olla virheellinen testitulos.
- Älä käytä testiä viimeisen käyttöpäivän jälkeen tai jos testin suoja pakkaus on vahingoittunut.
- Testitukun on oltava käytettäessä huoneenlämpöinen. Avamisen jälkeen testitukku on käytettävä tunnin sisällä.
- Käytä vain juuri otettua virtsanäytettä. Virtsaa voi säilyttää jääkaapissa (+2-8 °C) 48 tuntia.
- Testi sisältää pieniä osia, esim. kosteudenpoistajan, joita ei saa niellä.
- Testi on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön, ja jokainen testitukku on kertakäyttöinen. Tuotetta ei saa niellä.
- Valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava kaikaista vakavista tuotteeseen liittyvistä vaaratilanteista.

Testiin liittyvät rajoitukset

- Testiä käytetään hCG-hormonin tunnistamiseen virtsasta. hCG-hormonin pitoisuutta virtsassa ei voi päteällä testitiivian ja kontrolliivian värin vahvuuden ja kyläisyyden avulla.

SUORITUSKYKYOMINAIKUDET

1. Analyttinen herkkyys (LoD)
Raskaustesti (Midstream) LoD (tunnistusraja) on 9,65 mIU/ml.

2. Suurten vasta-ainepitoisuuksien aiheuttama "antigeeniylijäämä"
Suurten vasta-ainepitoisuuksien aiheuttama "antigeeniylijäämä" voitiin todeta vain, kun hCG-pitoisuus oli 200 000 mIU/ml tehdyssä raskaustestissä.

3. Analyttinen spesifisyys
Ristireaktioita ei havaittu seuraavissa kolmessa tilanteessa.

- LH-hormonin pitoisuus näytteessä (negatiivinen tai positiivinen) oli 500 mIU/ml.
- FSH-hormonin pitoisuus näytteessä (negatiivinen tai positiivinen) oli 1 000 mIU/ml.
- TSH-hormonin pitoisuus näytteessä (negatiivinen tai positiivinen) oli 1 000 mIU/ml.

4. Tarkkuus
Samasta pitoisuudesta tehtyjen toistuvien mittauksen välillä ei todettu epäjohdonmukaisuuksia.

5. Selonteko häiritsevästi vaikuttavista aineista

Substance	Concentration	Substance	Concentration
Acetaminophen	15,6 mg/dL	Albumin	6 mg/dL
Ascorbic Acid	5,25 mg/dL	Glucose	1000 mg/dL
Pseudoephedrine	0,33 mg/dL	Ampicillin	7,5 mg/dL
Salicylic Acid	2,86 mg/dL	Amoxicillin	5,40 mg/dL
Acetylsalicylic Acid	3,00 mg/dL	Ethanol	600 mg/dL
Cocaine	0,141 mg/dL	Ibuprofen	21,9 mg/dL

Edellä lueteltuja häiritseviä aineita sisältävien näytteiden kohdalla ei havaittu häiriöreaktiivisuutta. Myöskään muutokset virtsanäytteen pH-arvossa (4-9) tai ominaispainossa (1,000-1,035) eivät vaikuta tulokseen.

6. Raja-arvo
Raskaustestin (Midstream) raja-arvo on 10 mIU/ml. Jos hCG-hormonin pitoisuus näytteessä on yli 10 mIU/ml, testi voidaan todeta positiiviseksi.

7. Kliniset tulokset
Positive coincidence rate: 5 / 4 (5+4) × 100% = 100% (95% CI: 93,36 % - 100,00%). Negative coincidence rate: 4 / 6 (0+4) × 100% = 100% (95% CI: 92,29 % - 100,00%). Total coincidence rate: (5+4+6) / 100 × 100% = 100% (95% CI: 96,30% - 100,00%).

**FOR THE FREEDOM
OF EVERY BODY**


BY CHOOSING RFSU PRODUCTS
YOU SUPPORT OUR ONGOING WORK
FOR SEXUAL AND HUMAN RIGHTS.



NÄIN TEET TESTIN

Testin voi tehdä mihin vuorokaudenaikaan tahansa jo 6 päivää ennen kuukautisten poisjäämistä, eli 5 vuorokautta ennen kuukautisten odotettua alkamisajankohtaa*, mutta aamuvirtsasta mittaminen on varmint, koska hCG-pitoisuus on silloin korkeimmillaan.

Kun olet lukenut ohjeet ja olet valmis tekemään testin, ota testitukku sisäpakkauksesta. Käytä testitukku mahdollisimman pian.

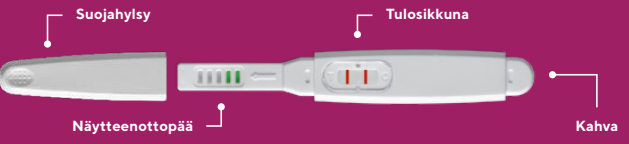

VAIHE 1: TESTAUS

A **Tee testi suoraan virtsausihkusta.** Pidä testipuikon näytteenotopää 10 sekuntia alaspin virtsausihkussa. Varo ettei virtsaa päädy tulosikkunaan.

B **TAI kerää virtsaa puhtaaseen ja kuivaan astiaan.** Upota koko näytteenotopää virtsaan 20 sekunnin ajaksi. Älä anna virtsan tason nousta testiliuskan muovikannen yläpuolelle.



VAIHE 2: ODOTA 1-5 MIN

- Kiinnitä suojajilyis takaisin paikoilleen, aseta puikko tasaiselle ja kuivalle alustalle tulosikkuna ylöspäin.
- Odota 1-5 minuuttia ennen tuloksen lukemista, ja anna testitukun olla vaakatasossa sitä liikuttamatta.
- Kun testitukku alkaa reagoida, koko tulosalue värjäytyy vaaleanpunaiseksi.



VAIHE 3: LUE TULOS

Lue tulos niin nopeasti kuin mahdollista 1-5 minuutin sisällä. Älä lue tulosta enää 5 minuutin jälkeen, sillä silloin tulos voi olla harhaanjohtava.

(T) Testiivaa **(C) Kontrolliivaa**



Positiivinen tulos – Raskaana

Kaksi selkeästi vaaleanpunaista/punaista viivaa tulosalueella. Jos näet kaksi selkeästi vaaleanpunaista/punaista viivaa, olet hyvin todennäköisesti raskaana. Testiivian (T) värin sävy ja vahvuus voi vaihdella, sillä hCG-hormonin määrä vaihtelee raskauden eri vaiheissa. Jos testaat aikaisin tai olet epävarma tuloksesta, on hyvä testata uudelleen kahden päivän kuluttua, mieluiten ensimmäisestä aamuvirtsasta. Jos olet raskaana, pyydä neuvoja lääkäriltä, terveydenhoitajalta tai gynekologilta.




Negatiivinen tulos – Ei raskaana

Jos tulosalueella näkyy vain yksi vaaleanpunainen kontrolliivaa, et ole raskaana. Jos kuukautisesi siitä huolimatta ovat myöhässä, tee uusi testi kahden päivän kuluttua, mieluiten ensimmäisestä aamuvirtsasta. Jos saat saman tuloksen ja kuukautisesi ovat edelleen myöhässä, ota yhteyttä lääkäriin, terveydenhoitajaan tai gynekologiin.

Mitätön tulos

Jos näytössä ei näy vaaleanpunaista/punaista kontrolliivaa (C), jos siinä ei näy mitään viivaa, tai jos viivan väri ei ole vaaleanpunainen/punainen/violetti, testi ei ole toiminut siten kuin sen pitäisi. Se voi johtua siitä, ettei näytteenotopää ole imenyt riittävästi virtsaa, tai että olet tehnyt testin väärin. Tee uusi testi ja noudata ohjeita tarkasti. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä RFSU:hun.

Joskus testiivaa (T) voi olla harmahtava/valkoinen. Testi on positiivinen vasta, kun testiivian (T) sävy on selvästi punainen, violetti tai vaaleanpunainen.

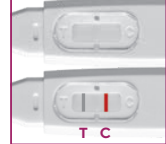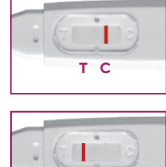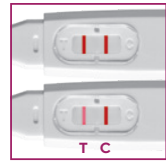

Kierrätät! Lajittele pakkaus pahvikeräykseen, sisäpakkauks muovisena ja käytetty testipuikko sekajätteeseen.

Art nr: I3710XA V2501:01

RFSU AB, Box 1279, Färögatan 33, 164 51 Kista, Sverige, [www.rfsu.com](#).

SYMBOLIN SELITYS

- IVD In vitro-lätkinnällinen laite
- Kertakäyttöinen
- Lue ohjeet ennen käyttöä
- Valmistaja
- Viimeinen voimassaolopäivä
- Tuotannon eranumero
- Lämpötilarajat
- CE-merkintä

**FOR THE FREEDOM
OF EVERY BODY**

BY CHOOSING RFSU PRODUCTS
YOU SUPPORT OUR ONGOING WORK
FOR SEXUAL AND HUMAN RIGHTS.



NORSK



FOR THE FREEDOM
OF EVERY BODY

GRAVIDITETSTEST TEST TIDLIG

Med RFSU Graviditetstest Test Tidlig kan du selv raskt og enkelt finne ut om du er gravid.

- Du kan teste allerede 6 dager før uteblitt menstruasjon.
- Graviditetstestens følsomhet er 10 mIU/ml av hormonet hCG (human Chorionic Gonadotropin) i urinen.
- Testen gir resultat med mer enn 99 % sikkerhet fra den dagen du ventet menstruasjonen.

Vil du vite mer om graviditet eller har du spørsmål om våre produkter, kan du lese mer på [rfsu.com](#).

Les instruksjonene nøye!

Tiltenkt bruk

Selvtest beregnet på å spore hCG (human Chorionic Gonadotropin) i urin for tidlig oppdagelse av graviditet.

Tiltenkt bruker

For hjemmebruk til kvinner i fruktbar alder

Innhold

- Emballasje: foliepose, bruksanvisning
- Foliepose: 1stk. graviditetstest, 1stk. tørrmiddel

Utstyr som er nødvendig, men ikke inngår

Tidtak og oppsamlingskopp.

SPØRSMÅL OG SVAR

Når kan jeg teste?

Du kan teste allerede 6 dager før uteblitt menstruasjon, som er 5 dager før forventet menstruasjon*. Har du uregelmessig mens, kan du teste i forhold til den lengste menstruasjonsklusen du har hatt de siste månedene. Hvis du tester før forventet menstruasjon og testen viser et negativt eller svært positivt resultat, anbefales det å ta en ny test etter et par dager. I tabellen nedenfor vises % av graviditetsresultater fra laboratorieprøver av graviditetstester tatt før forventet menstruasjon. Du kan teste når som helst på dagen, men det sikreste er å måle morgenurinen.

***Tabell**

Første dag du kan begynne å teste							
Antall dager før uteblitt menstruasjon.	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
Antall dager før forventet menstruasjon.	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1
% av påviste graviditeter	75%	95%	≥95%	≥99%	≥99%	≥99%	≥99%

Hva skal jeg gjøre dersom testen viser at jeg ikke er gravid?

Et negativt testresultat viser at det ikke er funnet noe hCG i urinen eller at konsentrasjonen på hCG er for lav til å bli oppdaget av testen (under 10 mIU/ml). En vanlig menstruasjonsklus kommer blædningen vanligvis 12-14 dager etter egglesningen. Tiden fra første blædningstid til egglesning kan imidlertid variere mer, og det er dette som iblant gir opphav til uregelmessig mens. Hvis testen viser negativt resultat, kan det komme av at din egglesning fant sted senere enn du tror. Hvis du testet tidlig, bør du teste på nytt når du ventet mens. Hvis mensen er forsinket, skal du teste på nytt om ca. 1 uke. Hvis du igjen får et negativt resultat og menstruasjonen ikke kommer tilbake, må du kontakte lege.

Hvor pålitelig er RFSU Graviditetstest?

RFSU Graviditetstest gir et resultat som er mer enn 99 % sikkert fra og med den dagen du forventer menstruasjonen.

Påvirkes resultatet av hvor mye væske jeg drikker?

Høyt væskeinntak kan forandre urin, og du vil det kanskje ikke være mulig å oppdage riktig mengde hCG i urinen. Du bør derfor ikke endre ditt vanlige væskeinntak. Du kan øke hCG-konsentrasjonen i urinen ved å drikke mindre og ikke tisse på ca. 2 timer før du tar testen. Du får sikreste resultat når du måler morgenurinen.

Hva om det ikke visas noen streker?

Hvis det ikke vises noen streker, ta en ny test, og følg bruksanvisningen nøye. Det kan skyldes at du ikke har utført testen på riktig måte.

Hvilke farger har strekene som vises?

Fargenyansen på teststreken (T) kan variere fra lys til mørk rød/rosa, avhengig av konsentrasjonen av hCG det er i urinen. Fargenyansen påvirker ikke resultatet, men bare rød/rosa farge gir gyldig resultat. Får du en annen farge, vent to dager og ta en ny test. Noen ganger kan teststreken være synlig i en grå/hvit nyanse. Det betyr at testresultatet er negativt. Testen er først positiv når teststreken (T) synes tydelig i en rød/rosa fargenyanse. Fargenyansen og fargestyrken mellom teststreken (T) og kontrollstreken (C) kan variere. Varianseier i kontrollstreken (C) fargenyanse mellom to ulike tester påvirker ikke testresultatet.

Hvor lenge står resultatet før det blinker bort eller endres?

Et positivt svar vil som oftest stå uforandret, men bakgrunnen kan bli mørkere. Les av resultatene innen 5 minutter etter at testen er utført, og eventuelle endringer etter 10 minutter bør ignoreres.

Forsiktighetsregler!

- Oppbevarer utlignelig for barn.
- Må ikke fryses.
- Les bruksanvisningen nøye før bruk. Hvis instruksjonene ikke følges nøye, kan utfallet bli feilaktig.

Bruk ikke testen etter utløpsdatoen eller hvis folieposen ser skadet ut.

- Graviditetstesten skal ha romtemperatur ved bruk. Etter åpning bør testen brukes innen 1 time.
- Bare nylig tatt urinprøve bør brukes. Urinen kan oppbevares i kjøleskap (+2-8 °C) i 48 timer.
- Enheten inneholder små deler, f.eks. tørkemiddel, som ikke må svelges.
- Testen er bare beregnet på utvortes bruk, og hver testpinne er for engangsbruk. Må ikke fortæres.
- Produsent og ansvarlig myndighet skal informeres om alle alvorlige, uønskede hendelser som er forbundet med produktet.

Testens begrensninger

- Testen skal benyttes for å identifisere hCG i urinprøve. Konsentrasjonen av hCG i urinprøven kan ikke

bedømmes ved hjelp av teststreken og kontrollstrekens fargestyrke og -metning.

- hCG kan oppdages i urin og gi falskt positivt svar flere uker etter gjennomgått fødsel, keisersnitt eller abort.
- Det finnes visse situasjoner som kan påvirke testresultatet; visse medisiner, myomer i livmoren, menopause/klimakterium, økt konsentrasjon av hormoner som f.eks. av LH, FSH og TSH osv. Det samme gjelder for visse uvanlige sykdommer eller hvis urinen inneholder store mengder bakterier. Kontakt lege hvis du får uventede eller inkonsekvente resultater.
- Ektopisk svangerskap (svangerskap utenfor livmoren) og cyster på eggstokkene kan gi feilaktige resultat. Visse sykdommer og kreftformer (f.eks. livmorkreft) kan påvirke testresultatet. Hvis du lider av en slik sykdom, bør du oppsøke lege før du tar en graviditetstest.
- P-piller, smertestillende midler, antibiotika eller hormonbehandling som ikke inneholder hCG, bør ikke påvirke testresultatet.
- Endelig beskjed om graviditet kan bare gis av lege.

YTTELSE OG EGENSKAPER

1. Analytisk følsomhet (LoD)

LoD (deteksjonsgrense) for tidlig graviditetstest (Midstream) er 9,65 mIU/ml.

2. "Hook effect" ved høy dose

Den høye dosen, dvs. hook effect, inntraff ikke opp til 200 000 mIU/ml hCG konsentrasjon for graviditetstest.

3. Analytisk spesifisitet

Det ble ikke observert kryssreaktivitet ved de tre situasjonene nedenfor.

- Konsentrasjonen av LH i prøven (negativ eller positiv) var 500 mIU/ml.
- Konsentrasjonen av FSH i prøven (negativ eller positiv) var 1000 mIU/ml.
- Konsentrasjonen av TSH i prøven (negativ eller positiv) var 1000 µIU/ml.

4. Presisjon

Ingen inkonsekvens mellom replikerte testresultat fra samme konsentrasjon.

5. Utredning av interferensstoffer

Substance	Concentration	Substance	Concentration
Acetaminophen	15,6 mg/dL	Albumin	6 mg/dL
Ascorbic Acid	5,25 mg/dL	Glucose	1000 mg/dL
Pseudoephedrine	0,33 mg/dL	Ampicillin	7,5 mg/dL
Salicylic Acid	2,86 mg/dL	Amoxicillin	5,40 mg/dL
Acetylsalicylic Acid	3,00 mg/dL	Ethanol	600 mg/dL
Codine	0,141 mg/dL	Ibuprofen	21,9 mg/dL

Det fantes ingen interferensreaktivitet for prøver som inneholdt interferansen oppløst ovenfor. Urinprøvens forandring i pH (fra 4 til 9) og spesifikk gravitasjon (1,000-1,035) påvirker ikke heller resultatene.

6. Grenseverdi

Grenseverdi for graviditetstest (Midstream) er 10 mIU/ml. Hvis hCG-konsentrasjonen i prøven var over 10 mIU/ml, kan prøven bestemmes som positiv.

7. Kliniske resultater

Positive coincidence rate: 5/4 / (5+4) × 100%=100% (95% CI: 93.36 % -100.00%). Negative coincidence rate: 4/6 / (0+4) × 100%=100% (95% CI: 9.2.29 % -100.00%). Total coincidence rate: (5+4+6) / 100 × 100%=100% (95% CI: 96.30% -100.00%).

FOR THE FREEDOM
OF EVERY BODY


BY CHOOSING RFSU PRODUCTS
YOU SUPPORT OUR ONGOING WORK
FOR SEXUAL AND HUMAN RIGHTS.



SLIK UTFØRER DU TESTEN

Du kan teste når som helst på døgnet allerede 6 dager før uteblitt menstruasjon, som er 5 dager før forventet menstruasjon*, men det sikreste er å måle morgenurinen, da hCG-konsentrasjonen er på det høyeste.

Når du har lest instruksjonene og er klar til å utføre testen, tar du graviditetstesten ut av den indre forpakningen. Bruk graviditetstesten med en gang.

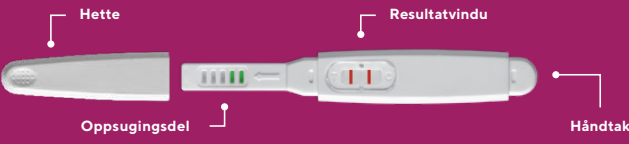

TRINN 1: UTFØR TESTEN

A Test direkte ved hjelp av urinstrålen. Fjern hetten. Hold graviditetstesten med oppsugsdelen ned i urinstrålen i 10 sekunder. Pass på at det ikke kommer urin på resultatvinduet.

B Tiss i en ren og tørr beholder. Dypp hele oppsugsdelen ned i urinen i 20 sekunder. Ikke la urinnivået stige over plastdekslet på testpinnen.

A



10 SEK

B



20 SEK

1-5 MIN



TRINN 3: LES AV RESULTATET

Les av resultatet så snart som mulig innen 1-5 minutter. Hvis du leser av resultatet etter 5 minutter, kan det gi misvisende resultater.

(T) Teststrekk **(C) Kontrollstrekk**



Positivt resultat – Gravid

To tydelige rosa/røde streker vises i resultatområdet. Hvis du ser to tydelige rosa/røde streker, betyr det at du høyst sannsynlig er gravid. Fargenyansen og fargestyrken på teststreken (T) kan variere ettersom ulike stadier av graviditet har ulike konsentrasjoner av hCG-hormon. Hvis du tester tidlig eller er usikker, er det lurt å teste på nytt 2 dager senere, helst med den første morgenurinen. Hvis du er gravid, kontakt lege for å få råd.

Negativt resultat – Ikke gravid

Hvis bare én kontrollstrekk vises i resultatområdet, er du ikke gravid. Hvis du likevel ikke får menstruasjon, tar du en ny test etter 2 dager, helst med den første morgenurinen. Hvis du får samme resultat og ikke har fått menstruasjon, kontakt lege.

Ugyldig resultat

Hvis ingen rosa/rød kontrollstrekk (C) er synlig, ingen strek i det hele tatt vises eller hvis strekene har en annen farge enn rosa/rød, har testen ikke fungert som den skal. Det kan skyldes at oppsugsdelen ikke har trukket til seg nok urin eller at du ikke har utført testen på riktig måte. Utfør en ny test, og følg bruksanvisningen nøye. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med RFSU.

Noen ganger kan teststreken (T) vises i en grå/hvit nyanse. Testen er først positiv når teststreken (T) vises tydelig i en rød/rosa fargenyanse.

Kan gjenvinnes! Sorter emballasjen som papiremballasje, indre forpakningen (foliepose) som plast og kast brukte testpinner sammen med restavfall.

Art nr.: I3710XA V2501:01

RFSU AB, Box 1279, Färögatan 33, 164 51 Kista, Sverige, [www.rfsu.com](#).

SYMBOLFORKLARING

- IVD** In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr
- Les bruksanvisningen før bruk
- Holdbarhetsdato
- Temperaturgrenser
- Kun til engangsbruk
- Produsent
- Produktionsbatchnummer
- CE-merking
- Må ikke oppbevares i direkte sollys
- Oppbevares på et tørt sted
- Bruk ikke testen dersom folieemballasjen er skadet

FOR THE FREEDOM
OF EVERY BODY

BY CHOOSING RFSU PRODUCTS
YOU SUPPORT OUR ONGOING WORK
FOR SEXUAL AND HUMAN RIGHTS.



DANSK



FOR THE FREEDOM
OF EVERY BODY

GRAVIDITETSTEST TEST TIDLIG

Med RFSU's Graviditetstest Test Tidlig kan du selv hurtigt og nemt finde ud af, om du er gravid.

- Du kan allerede foretage testen 6 dage før udeblevet menstruation.
- Testens følsomhed måler 10 mIU/ml af hormonet hCG (human Chorionic Gonadotropin) i urinen.
- Testens resultat er mere end 99 % sikkert fra den dag, du forventer din menstruation.

Hvis du ønsker at vide mere om graviditet eller har spørgsmål om vores produkter, kan du læse mere på [rfsu.com](#).

Læs instruktionerne omhyggeligt!

Påtaendt anvendelse

Test til hjemmebrug til påvisning af hCG (human Chorionic Gonadotropin) i urin til tidlig påvisning af graviditet.

Påtaendt bruger

Til hjemmebrug for kvinder i den fødedygtige alder

Innhold

- Emballage: foliepose, bruksanvisning
- Foliepose: 1stk. testpind, 1stk. tørrmiddel

Nødvendige materialer, som ikke er inkluderet

Timer og opsamlingsbæger.

SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvornår kan jeg teste?

Du kan teste allerede 6 dage før udeblevet menstruation*. Har du uregelmæssig menstruation, kan du teste i forhold til den længste menstruasjonsklusen du har haft i løbet af de sidste par måneder. Hvis du tester tidlig, før forventet menstruation, og testen viser et negativt eller svært positivt resultat, anbefales det at tage en ny test efter et par dage. Nedenstående tabel viser % af graviditetsresultater fra laboratorieundersøgelser af graviditetstester, taget før forventet menstruation. Du kan teste når som helst på døgnet, men det er sikrest at måle morgenurinen.

***Tabell**

Første dag du kan begynde at teste							
Antal dage før udeblevet menstruation.	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
Antal dage før forventet menstruation.	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1
% af opdagede graviditeter	75%	95%	≥95%	≥99%	≥99%	≥99%	≥99%

Hvad skal jeg gøre, hvis testen viser, at jeg ikke er gravid?

Et negativt testresultat betyder, at der ikke er påvist hCG i din urin, eller at koncentrationen af hCG er for lav til, at den kan påvises af testen (under 10 mIU/ml). En normal menstruasjonsklus indtraffer blædningen normalt 12-14 dage efter æggløsningen. Tiden fra første blædningstid til æggløsning kan dog variere mere, og det er det, der nogle gange forårsager uregelmæssig menstruation. Hvis testen er negativ, kan det skyldes, at din æggløsning fandt sted senere, end du troede. Hvis du har testet tidligt, bør du teste igen ved forventet menstruation. Hvis din menstruation er forsinket, skal du teste igen efter ca. 1 uge. Hvis resultatet stadig er negativt, og du ikke får din menstruation, skal du kontakte din læge eller gynækolog.

Hvor pålidelig er RFSU's graviditetstest?

RFSU's graviditetstest har en nøjagtighed på over 99 % fra den dag, du forventer din menstruation.

Påvirkes resultatet af, hvor meget væske jeg drikker?

Et meget stort væskeindtag kan fortynde urinen, så mængden af hCG i urinen måske ikke kan påvises. Du bør derfor ikke ændre dit sædvanlige væskeindtag. Du kan øge hCG-konsentrationen i urinen ved at drikke mindre og ikke tisse i ca. 2 timer, inden prøven udføres. Det sikreste er at måle morgenurinen.

Hvis der ikke er nogen synlig linje?

Hvis der ikke vises nogen linje, skal du udføre en ny test og følge bruksanvisningen meget nøje. Det kan skyldes, at du ikke har udført testen korrekt.

Hvilke farver har de linjer, der vises?

Farvenuancen på testlinjen (T) kan variere fra lyserød til mørkerød, afhængigt af hvilken koncentration af hCG der er i urinen. Farvenuancen påvirker ikke resultatet, men kun en rød/lyserød farve giver et gyldigt resultat. Hvis du får en anden farve, skal du vente to dage og tage en ny test. Nogle gange kan testlinjen være synlig i en grå/hvid nuance. Testen er først positiv, når testlinjen (T) ses tydeligt i en rød/lyserød farvenuance. Farvenuancen og farvestyrken mellem testlinjen (T) og kontrollinjen (C) kan variere. Variationer i kontrollinjen (C) farvenuance mellem to forskellige test påvirker ikke testresultatet.

Hvor længe holder resultatet, før det falmer eller ændrer sig?

Afhængigt af koncentrationen af hCG i urinen kan et positivt testresultat blive synligt efter 40 sekunder, men testen bør aflæses inden for 5 minutter. Et positivt svar vil oftest forblive uændret, men baggrunden kan dog blive mørkere. Aflæs resultaterne inden for 5 minutter efter udførelsen af testen, og eventuelle ændringer efter 10 minutter skal ignoreres.

Sikkerhedsforanstaltninger!

- Opbevares utillængelig for børn.
- Må ikke fryses.
- Læs bruksanvisningen omhyggeligt før brug. Hvis instruksjonene ikke følges til punkt og prikke, kan utfaldet blive misvisende.
- Bruk ikke testen efter udløpsdatoen, eller hvis folieposen virker beskadiget.
- Testpinden skal have stuetemperatur, når den bruges. Efter åbning bør testpinden bruges inden for 1 time.
- Der bør kun anvendes en nyligt taget urinprøve. Urinen kan opbevares i køleskabet (+2-8 °C) i 48 timer.
- Testen indeholder små dele, fx tørremidler, som ikke må sluges.
- Testen er kun beregnet til udvortes brug, og hver testpind er kun til engangsbrug. Må ikke indtages.
- Producenten og den kompetente myndighed skal underrettes om alle alvorlige hændelser i forbindelse med produktet.

Testens begrensninger

- Testen skal anvendes til at påvise hCG i urinprøve. Koncentrationen af hCG i urinprøven kan ikke vurderes

på grundlag af testlinjen og kontrollinjen farventensitet og mætning.

- hCG kan påvises i urinen og give et falsk positivt svar flere uger efter en fødsel, et keisersnit eller en abort.
- Visse situationer kan påvirke testresultatet; visse lægemidler, myom i livmoderen, overgangsalder/menopause og øget koncentration af hormoner såsom LH, FSH og TSH osv. Det samme gælder visse sjældne sygdomme, eller hvis din urin indeholder store mængder bakterier. Kontakt din jordemoder eller gynækolog, hvis du får uventede eller inkonsekvente resultater.
- Ektopisk svangerskab (graviditet uden for livmoderen) og cyster på æggstokkene kan give misvisende resultater. Visse sygdomme og kræftformer (f.eks. livmoderumor) kan påvirke testresultatet. Hvis du lider af en sådan sygdom, bør du konsultere en læge, før du tager en graviditetstest.
- P-piller, smertestillende medicin, antibiotika eller hormonbehandling, der ikke indeholder hCG, bør ikke påvirke testresultatet.
- En endelig graviditetsdiagnose kan kun stilles af en jordemoder, læge eller gynækolog.

YDEEVNE EGENSKABER

1. Analytisk følsomhed (LoD)

LoD (påvisningsgrense) for tidlig graviditetstest (Midstream) er 9,65 mIU/ml.

2. "Hook effect" ved høj dosis

Den høje dosis, dvs. den såkaldte "hook effect", blev ikke fundet ved en koncentration af hCG på op til 200 000 mIU/ml for graviditetstest.

3. Analytisk spesifisitet

Der blev ikke observeret nogen krydsreaktivitet i de tre nedenstående situationer.

- Koncentration af LH i prøven (negativ eller positiv) var 500 mIU/ml.
- Koncentration af FSH i prøven (negativ eller positiv) var 1.000 mIU/ml.
- Koncentration af TSH i prøven (negativ eller positiv) var 1.000 µIU/ml.

4. Nøjagtighed

Ingen uoverensstemmelse mellem gentagne testresultater ved samme koncentration.

5. Undersøgelse af interferensstoffer

Substance	Concentration	Substance	Concentration
Acetaminophen	15,6 mg/dL	Albumin	6 mg/dL
Ascorbic Acid	5,25 mg/dL	Glucose	1000 mg/dL
Pseudoephedrine	0,33 mg/dL	Ampicillin	7,5 mg/dL
Salicylic Acid	2,86 mg/dL	Amoxicillin	5,40 mg/dL
Acetylsalicylic Acid	3,00 mg/dL	Ethanol	600 mg/dL
Codine	0,141 mg/dL	Ibuprofen	21,9 mg/dL

Der blev ikke fundet interferensreaktivitet ved prøver, der indeholdt de interferenser, der er anført på listen ovenfor. Resultaterne påvirkes heller ikke af variationer i urinprøvens pH-værdi (fra 4 til 9) eller vægtylde (1,000-1,035).

6. Grænseverdi

Grænseværdien for graviditetstest (Midstream) er 10 mIU/ml. Hvis hCG-konsentrasjonen i prøven var over 10 mIU/ml, kan prøven bestemmes som positiv.

7. Kliniske resultater

Positive coincidence rate: 5/4 / (5+4) × 100%=100% (95% CI: 93.36 % -100.00%). Negative coincidence rate: 4/6 / (0+4) × 100%=100% (95% CI: 9.2.29 % -100.00%). Total coincidence rate: (5+4+6) / 100 × 100%=100% (95% CI: 96.30% -100.00%).

FOR THE FREEDOM
OF EVERY BODY


BY CHOOSING RFSU PRODUCTS
YOU SUPPORT OUR ONGOING WORK
FOR SEXUAL AND HUMAN RIGHTS.



SÅDAN FORETAGER DU TESTEN

Du kan teste når som helst på døgnet allerede 6 dage før udeblevet menstruation, hvilket er 5 dage før forventet menstruation*, men det er sikrest at måle morgenurinen, idet hCG-konsentrationen da er højest om morgenen.

Når du har læst instruktionerne og er klar til at tage testen, tager du graviditetstesten ud af den indvendige emballage. Brug testpinden med det samme.

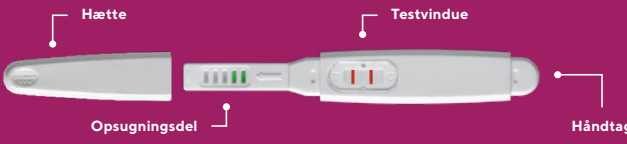

TRIN 1: UDFØR TESTEN

A Test direkte i urinstrålen. Hold opsugsdelen med spidsen nedad i urinstrålen i 10 sekunder. Undgå, at der kommer urin på testvinduet.

B Eller test i en urinprøve, som du har samlet i en ren og tør beholder. Nedsænk hele opsugsdelen i urinen i 20 sekunder. Lad ikke urinniveauet stige over testpindens plastdæksel.

A



10 SEK

B



20 SEK

1-5 MIN



TRIN 2: VENT 1-5 MINUTTER

- Lad testpinden ligge helt stille, og vent 1-5 minutter, før du aflæser resultatet.
- Når testpinden begynder at reagere, farves hele resultatområdet lyserødt.

TRIN 3: AFLÆS RESULTATET

En eller to røde/lyserøde linjer, testlinjen og kontrollinjen, vises mod en lys baggrund i resultatområdet ved siden af den farvede del. Den ene linje er til kontrol og den anden linje til testresultatet. **Aflæs resultatet så hurtigt som muligt inden for 5 minutter. Aflæs ikke resultater efter 5 minutter, da det kan give misvisende resultater.**

Positivt resultat – Gravid

To tydelige røde/lyserøde linjer vises i resultatområdet. Hvis du ser to tydelige røde/lyserøde linjer, betyder det, at du højest sandsynligt er gravid. Farvenuancen og farvestyrken af testlinjen (T) kan variere, fordi forskellige graviditetsstadier har forskellige koncentrationer af hCG-hormon. Hvis du tester tidligt eller er usikker, er det godt at teste igen 2 dage senere, helst med den første morgenurin. Hvis du er gravid, skal du kontakte din læge eller gynækolog for rådgivning.

Negativt resultat – Ikke gravid

Hvis der kun vises en røde/lyserøde kontrollinje i resultatområdet, er du ikke gravid. Hvis du stadig ikke får din menstruation, skal du tage en ny test efter 2 dage, helst med den første morgenurin. Hvis du opnår samme resultat, og du ikke har fået din menstruation, skal du kontakte din læge eller gynækolog.

Ugyldig resultat

Hvis ingen røde/lyserøde kontrollinje (C) er synlig, hvis der slet ikke vises nogen linjer, eller hvis linjerne har en anden farve end røde/lyserøde, har testen ikke fungeret korrekt. Det kan skyldes, at den opsugende del ikke har suget tilstrækkeligt urin op, eller at du ikke har udført testen korrekt. Tag en ny test, og følg anvisningerne nøje. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte RFSU.

Nogle gange kan testlinjen (T) være synlig i en grå/hvid nuance. Testen er først positiv, når testlinjen (T) ses tydeligt i en røde/lyserød farvenuance.

Affaldssortering! Emballagen sorteres som pap, foliepose som plastemballage, testpinden kasseres som almindeligt husholdningsaffald.

Art nr.: I3710XA V2501:01

RFSU AB, Box 1279, Färögatan 33, 164 51 Kista, Sverige,

SYMBOLFORKLARING

- IVD** In vitro-diagnostisk medicinteknisk produkt
- Les bruksanvisningen før bruk
- Holdbarhetsdato
- Temperaturgrenser
- Må ikke genbruges
- Producent
- Produktionsbatchnummer
- CE-mærking
- Må ikke oppbevares i direkte sollys
- Oppbevares på et tørt sted
- Benytt ikke testen hvis folieemballagen er beskadiget

FOR THE FREEDOM
OF EVERY BODY

BY CHOOSING RFSU PRODUCTS
YOU SUPPORT OUR ONGOING WORK
FOR SEXUAL AND HUMAN RIGHTS.

