



ENJOY FREEDOM

Enjoy freedom is about making your own choices. Let the fire of your unique sexuality heat up your life and immerse you in the vibrant energy of being intensely alive. When you give yourself the gift of freedom, you also give it to others.

www.rfsu.com

While having sex with RFSU condoms know that your are supporting body rights all over the world.

SE: Att använda kondom

1. Öppna förpackningen som teckningen visar. Använd inga skarpa föremål. Rulla först upp kondomen en bit så att det syns tydligt åt vilket håll den skall rullas på.
2. Kläm behållaren mellan tumme och pekfinger för att få bort luft. Före nära kontakt med din partner, dra tillbaka förhuden och rulla på kondomen försiktigt så den inte ripsas av naglarna.
3. Direkt efter utlösningen dras penis ut och kondomen hålles noga på plats så att ingen sperma rinner ut. Använd kondomen endast en gång.

Kondom är det enda preventivmedel som skyddar mot både graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar. När du använder extra glidmedel ska det vara vatten- eller silikonbaserat, RFSU har ett brett sortiment att utgå ifrån. Använd inte oljebaserade varianter som t ex barnolja eller vaselin.

När du köper RFSUs produkter bidrar du till arbetet med sexualupplysning och mänskliga rättigheter i Norden och stora delar av världen. Inget preventivmedel är 100% säkert.

NO: Å bruke kondom

1. Pakningen åpnes som vist på tegningen. Ikke bruk skarpe gjenstander. Rull først ut kondomet et stykke, slik at du tydelig ser hvilken vei den skal rullas på.
2. Klem luften ut av kondomet med tommel og pekefinger. Før du har fysisk kontakt med partner, trekk forhuden tilbake og rull på kondomet forsiktig, så den ikke skades av neglene.
3. Rett etter utløsning drar du penis ut og holder samtidig kondomet på plass, slik at sæden ikke renner ut. Bruk kondomet kun en gang.

Kondom er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot både uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer. Hvis du bruker ekstra glidemiddel skal det være vann- eller silikonbasert. RFSU har et bredt utvalg glidemidler å velge fra. Ikke bruk oljebasert glidemiddel som f.eks babyolje eller vaselin.

När du köper RFSUs produkter bidrar du till arbetet med sexualupplysning och mänskliga rättigheter i Norden och stora delar av världen. Ingen prevensjonsmedel er 100% sikre.



Tillverkare/Produsent/Producent/Valmistaja: RFSU AB, Box 1279, Färögatan 33, 164 29 Kista, Sweden. www.rfsu.com

DK: Anvendelse af kondom

1. Emballagen åbnes som vist på tegningen. Anvend ikke nogen skarpe genstande. Rul kondomet en smule ud, så man tydeligt ser, hvilken vej det skal rulles på.
2. Klem luften ud af kondomets reservoir med tommel- og pegefing. Træk forhuden tilbage, og rul kondomet på den erigerede penis, før der etableres fysisk kontakt med partneren. Ungdå at rive kondomet på negle eller andre genstande.
3. Straks efter udløsningen trækker du langsomt penis ud, mens du holder kondomet på plads, så sæden ikke løber ud.

Kondomet er det eneste præventionsmiddel, som beskytter mod både graviditet og seksuelt overførte sygdomme. Når du bruger glidecreme, skal den være vandbaseret eller silikonbaseret, f.eks. RFSUs Klück eller Sense Me. Brug ikke oliebaserede glidcremer som f.eks. babyolie, vaseline el. lign.

Overskuddet fra salgsaktiviteterne går til information og oplysning om sex- og samlivsoplysning, både i Norden og internationalt. Intet præventionsmiddel er 100% sikkert.

FI: Näin käytät kondomia

1. Avaa pakkaus piirroksen mukaisesti. Älä käytä teräviä esineitä. Rullaa kondomia hieman auki varmistaksesi oikea avautumisunta.
2. Purista ilma pois kondomin kääntä peukalolla ja etusormella. Vedinä ohjeita taakse ja rullaa kondomi paikalleen ennen intiimiä ihokosketusta. Varo raapimasta kondomia kynsillä.
3. Vedä penis ulos heti siemensyöksyn jälkeen samalla varmistaen, että kondomi pysyy paikallaan eikä spermaa pääse valumaan ulos. Käytä kutakin kondomia vain kerran.

Kondomi on ainoa ehkäisyväline, joka suojaa sekä ei-toivotulta raskaudelta että sukupuoliteitse tarttuvilta taudilta. Kun käytät liukuvoiteita, on sen oltava vesi- tai silikonipohjaisia. RFSU:n laajasta valikoimasta löydät useita erilaisia liukuvoiteita. Älä käytä öljypohjaisia aineita kuten vaseliinia, hoito- tai hierontaöljyä tai ihovoietta.

Ostaessasi RFSU:n tuotteita tuet seksuaalivaltistus- ja ihmisoikeustyötä Pohjoismaissa ja muualla maailmassa. Yksikään ehkäisyväline ei takaa 100% varmuutta.

Importør/Maahantuojat: RFSU Norge AS, Oslo, Conaxess Trade Denmark, Søborg, Suomen RFSU Oy, Vantaa/Vanda

SWEET
SE: Mix av de populäraste kondomerna med arom för doft och smak - för dig som vill stimulera fler sinnen än ett: 1st Profil/Magic Juicy Grape, 1st Profil/Magic Banana split, 1st Thin Pina Colada, 1st Thin Raspberry, 1st Näkken Honey Melon, 1st Näkken Cola, 1st Regular Strawberry and 1st Regular Vanilla. NO/DK: Mix av/af de mest populære kondomene med aroma for lukt/duft og smak/smag. For deg/dig som vil/ønsker at stimulere flere sanser enn en: 1stk Profil Banana split, 1stk Thin Pina Colada, 1stk Thin Raspberry, 1stk Näkken Honey Melon, 1stk Näkken Cola, 1stk Regular Strawberry og 1stk Regular Vanilla. FI: Lajitelma suosituimpia kondomeja erilailla tuoksua- ja makuaromeilla sinulle, joka haluat stimuloida useampia aisteja: 1kpl Magic Juicy Grape, 1kpl Magic Banana Split, 1kpl Thin Pina Colada, 1kpl Thin Raspberry, 1kpl Näkken Honey Melon, 1kpl Näkken Cola, 1kpl Regular Strawberry ja 1kpl Regular Vanilla.


ENJOY VARIATION
SE: Mix av kondomer med unika egenskaper för ökad upplevelse för dig som söker variation: 2 st Beyond Thin, 2st Power Boost, 1st Profil Juicy Grape, 1st Thin Pina Colada, 1st Näkken Honey Melon, 1st Regular Strawberry och 1st 7.5 ml Caring massage glide. NO/DK: Mix av/af kondomer med unike egenskaper for deg som ønsker variasjon: 2 stk Beyond Thin, 2 stk Power Boost, 1 stk Profil/Magic Juicy Grape, 1stk Thin Pina Colada, 1stk Näkken Honey Melon, 1stk Regular Strawberry og 1stk 7.5 ml Caring massage glide. FI: Lajitelma nautintoa lisääviä kondomeja sinulle, joka kaipaat vaihtelua, 2kpl Beyond Thin, 2kpl Power Boost, 1kpl Magic Juicy Grape, 1kpl Thin Pina Colada, 1kpl Näkken Honey Melon, 1 Regular Strawberry ja 1kpl 7,5ml Caring Massage Glide -liukuvoide.

Art. Nr. 10801NZ
05 2018 ver.no.2




PROFIL/MAGIC

SE: Profil är kondomer med insvängad topp för bäst passform och ökad känsla. NO/DK: Profil er kondomer med innsvinget/indsnævret tupp/spids for bedre passform og økt/øget følsomhet/følelse. FI: Magic-kondomi puristaa parhaasta paikasta ja lisää tuntoherkkyyttä.

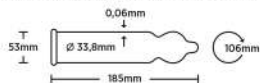


THIN

SE: Thin är tunna kondomer för en närmare känsla, nästan som utan. NO/DK: Thin er tynde/tynde kondomer for en nærmere/tættere følelse, nesten som uten/uden. FI: Thin-kondomi on hyvin ohut - lähemmäksi et päase.

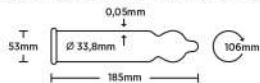


NÄKKEN

SE: Näkken är kondomer med knottor för ökad njutning och gör det skönare för båda. NO/DK: Näkken er kondomer med knuder/knopper som gir økt/øget nytelse for begge. FI: Näkken-kondomin juomupinta lisää nautintoa ja on molempien mieleen.

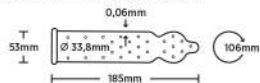


GRANDE

SE: Grande är extra rymliga och kondomer med generös form som ger bättre passform och känsla. NO/DK: Grande er ekstra romslige/rummelige og sikre kondomer med avrundet form som gir bedre passform og følelse/følsomhet. FI: Grande on tavallista kondomia tilavampi, mikä takaa paremman istuvuuden ja tunteen.

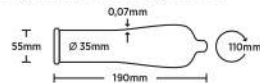


GRANDE XL

SE: RFSU Grande XL är extremt rymliga kondomer med extra generös form som ger bättre passform och känsla. NO/DK: RFSU Grande XL er ekstra romslige/rummelige kondomer med en ekstra generös form som gir bedre passform og følelse. FI: RFSU Grande XL on hyvin tilava kondomi, jonka pidempi ja leveämpi muotoilu takaa paremman istuvuuden ja tunteen.

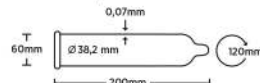


TIGHT

SE: Tight Slim fit är kondomer med en tätt passform. NO/DK: Tight Slim fit er kondomer med en tettstittende/tætsiddende passform. FI: Tight Slim fit -kondomi on suunniteltu mukavan tiukaksi.

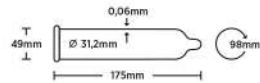


REGULAR

SE: Rak, ofärgad kondom med slät yta, behållare och glidmedel med arom. NO/DK: Rett/lige, ufarget/ufarvet latexkondom med glatt overflate, beholder/reservoir og glidemiddel/glidecreme med aroma. FI: Suora ja sileäpintainen makukondomi. Makuina mansikka ja vanilja.

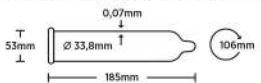


17006

SE: Transparent, rak och slät kondom utan behållare och glidmedel. NO/DK: Transparent, rett/lige og glatt kondom uten/uden beholder/reservoir og glidemiddel/glidecreme. FI: Läpinäkyvä, suora kondomi ilman säiliötä ja liukastetta.

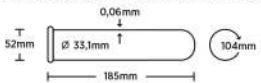


SENSITIVE

SE: Sensitive är extra tunn och luktrig plastkondomer som leder kroppsvärme och ger en naturlig känsla. Kan användas av latexallergiker. NO/DK: Sensitive er ekstra tynde/tynde og luktfrie/lugtfrie plastkondomer som leder kroppsvärme og gir en naturlig følelse. Kan benyttes av latexallergikere. FI: Sensitive-kondomi on erittäin ohut ja hajuton. Kondomi välittää kehon lämpöä luonnollisella tavalla ja sopii myös kumi- ja latexallergikoille.

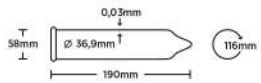

BEYOND THIN/TRUE FEELING

SE: Beyond Thin/True Feeling är sensationellt tunna kondomer som ger en optimal hudnära naturlig och skön känsla - nästan som utan. NO/DK: Beyond Thin/True Feeling er sensasjonelt/sensationelt tynde/tynde kondomer som gir/giver en optimal naturlig og deilig/skøn nær huden opplevelse - nesten som uten/uden. FI: Beyond Thin on seiltöhutis kondomi, joka takaa ainutlaatuisen läheisyyden ja luonnollisen kosketuksen - melkein kuin ilman.

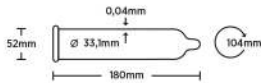

POWER BOOST

SE: Power Boost är kondomen med extra allt. Den kan förstärka erektionen, ge ökad sexuell njutning och en mer intensiv känsla för båda. Glidmedlet innehåller aminosyran L-Arginin. NO/DK: Power Boost er kondomet med mye/meget ekstra. Den kan forbedre ereksjonen/erektionen, gi økt/øget seksuell nytelse og en mer intens følelse for begge. Glidmeddelet/glidecremen på kondomet inneholder aminosyren L-arginin. FI: Power Boost on kondomi kaikilla lisävarustella. Nypytytty juomukondomi, jonka liukuvoite sisältää aminohappo L-arginiiniä. Tämä kondomi lisää seksuaalista nautintoa, antaa intensiivisemmän tunteen molemmille ja voi vahvistaa erektiota.

