

## ANVÄNDARINFORMATION

1. Hantera kondomerna försiktigt. Öppna förpackningen som teckningen visar. Undvik skarpa föremål, t.ex. vassa naglar, smycken mm, vid hantering och öppning. Rulla först upp kondomen en bit så att det syns tydligt åt vilket håll den skall rullas på. Kontrollera utgångsdatum på kondomslaget innan du använder kondomen.
2. Klam behållaren mellan tumme och pekfinger för att få bort luften. Innan intim kontakt sker mellan penis och din partner, rulla du kondomen på den erigerade penisen för att förhindra graviditet eller spridning av sexuellt överförbara infektioner.
3. Stanna upp och kontrollera att kondomen sitter på plats.

4. Direkt efter utlösningen dras penis ut och kondomen hålles noga på plats vid penisroten så att ingen sperma rinner ut.
5. Konsultera läkare om du tar något läkemedel (t.ex. salva) som vid eventuellt kontakt med kondomen kan innebära någon risk för nedsatt funktion.

Om kondomen spricker vid användning, kontakta sjukvården inom 72h.

## SÄKERHETSINFORMATION

Kondom är det enda preventivmedel som skyddar mot både graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar. Kondom används av sexuellt aktiva personer som ett preventivmedel och/eller vid förebyggande av sexuellt överförbara infektioner (STI) som HIV och andra varliga sexuella sjukdomar.

Om du önskar använda extra glidmedel rekommenderas vatten- eller silikonbaserat glidmedel. Oljebaserade produkter (t.ex. barnolja, vaselin och vissa pessar) kan skada kondomen. Förvaras oödmåligt för barn.

## KONTRAIKATIONER

Kondomen ska inte användas om graviditet önskas eller om allergi förekommer mot latex, silikonolja eller någon av ingående smäkämnen. Tillverkaren och den behöriga myndigheten skall informeras om alla allvarliga tillbud som inträffat med produkten.

Inget preventivmedel är 100% säkert.

När du köper RFSUs produkter bidrar du till arbetet med sexualupplysning och mänskliga rättigheter i Norden och stora delar av världen.

## BRUGERINFORMATION

1. Vær forsigtig når du åbner emballagen. Emballagen åbnes som vist på tegningen. Undgå skarpe genstande, såsom skarpe negle, smykker osv., når du åbner og åbner kondomet. Rul kondomet en smule ud, så man tydeligt ser, hvilken vej det skal rulles på. Tjek udløbsdatoen på kondomindpakningen, når du bruger kondomet.

2. Klem luften ud af kondomens reservoir med tommel- og pegefinger. Inden du og din partner har intim kontakt, skal du rulle kondomet på den erigerede penis for at forhindre graviditet eller spredning af seksuelt overførbare infektioner.
3. Dobbeltsjekk at kondomet sidder som det skal.

4. Umiddelbart efter udløsning trækkes penis ud, og kondomet holdes forsigtigt på plads ved roden af penis, så sæden ikke løber ud.
5. Kontakt din læge, hvis du bruger lægemidler (f.eks. salve), som ved eventuel kontakt med kondomet kan indebære risiko for nedsat funktion.

6. Hvis kondomet brister under brug, skal du kontakte din læge inden for 72 timer.

## Sikkerhedsinformation

Kondomer er den eneste præventionsmetode, der beskytter mod både graviditet og seksuelt overførte sygdomme. Kondomer bruges af seksuelt aktive mennesker som præventionsmiddel og/eller til forebyggelse af seksuelt overførte infektioner (STI) som HIV og andre alvorlige seksuelle sygdomme.

Hvis du ønsker at bruge ekstra glidemiddel, anbefales vatten- eller silikonbaserede glidcremer. Oljebaserede produkter (f.eks. babyolie, vaselin og nogle pessarer) kan beskadige kondomet. Opbevares utilgængeligt for børn.

## Kontraindikationer

Kondomet må ikke bruges, hvis der ønskes graviditet, eller hvis der er allergi over for latex, silikonolie eller nogen af de anvendte aromatstoffor. Producenten och den kompetenta myndigheten skall informeras om enhver allvarig händelse, der involverer produktet.

Intet præventionsmiddel er 100% sikkert.

När du köper RFSUs produkter, bidrar du till arbetet med sexualupplysning och mänskliga rättigheter i Norden och stora delar av världen.

## KÄYTÖOHJEET

1. Käsittele kondomia varovaisesti. Avaa pakkaus piirroksen mukaisesti. Vältä kondomin käsittelyä ja kääreen avaimien aikana teräviä esineitä, kuten teräviä kynsiä, koruja jne. Rullaa kondomia hieman auki varmisttaaksesi oikean avautumissuunnan. Tarkista kondomin kääreessä oleva viimeinen käyttöpäivä ennen kondomin käyttööä.

2. Purista ilma pois kondomin kärjestä peukalolla ja etusormella. Ennen penisen ja kumppanin välistä intiimitä kosketusta, rullaa kondomi erottossa oleva peniskeen estäessä raskaus tai seksitautiin lievämmin. Varo raapimasta kondomia kynsillä.
3. Tarkista, että kondomi on asetettu hyvin paikalleen.

4. Välttämättä siemensyöksyn jälkeen penis vedetään ulos ja kondomia pidetään varovasti paikallaan penisken juuresta, jotta siemennestettä ei vakuulo.

5. Konsultoi lääkäriä, jos käytät lääkkeitä (esim. voidetta), jotka voivat joutua suunsa kosketuksiin kondomin kanssa heikentää sen toimintakykyä.

6. Jos kondomi on hajonnut käytössä, ota yhteyttä terveydenhuoltoon 72 tunnin kuluessa.

## Turvallisuustietoja

Kondomi on ainoa ehkäisymenetelmä, joka suojaa sekä raskaudelta että seksitauteilta. Seksuaalisesti aktiiviset ihmiset käyttävät kondomia ehkäisyvälineenä ja/tai sukupuoliteiteen tarttuvien tautien, kuten HIV:n ja muiden yleisten seksitautiin, ehkäisyyssä.

Jos haluat käyttää ylimääräistä lukuvoidetta, suositellaan auki tai silikonipohjaista lukuvoidetta. Olijypohjaiset tuotteet (esim. vauvoöljy, vaseliini ja jotkut voiteet) voivat vahingoittaa kondomia. Säilytä lasten ulottumattomassa.

## Vasta-aiheet

Kondomia ei saa käyttää, jos halutaan raskautta tai jos on allerginen lateksille, silikonijäljelle tai jollekin käytetyille aromeineille. Valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava kaikista tuotteenä liittyvistä vakavista vaaratilanteista. Mikään ehkäisyväline ei ole 100-prosenttinen turvallinen.

RFSU:n tuotteita ostamalla tuet seksuaalivaltuusta ja ihmisoikeuksista Pohjoismaissa ja muualla maailmassa.

## BRUKERINFORMASJON

1. Vær forsigtig når du åbner forpakningen. Pakningen åbnes som vist på tegningen. Ikke bruk skarpe gjenstander, f.eks lange negler, smykker osv., når du skal åpne forpakningen. Rul først ut kondomet et stykke, slik det blir tydelig hvilken vei det skal rulles på. Sjekk utløpsdatoen på kondominnpakningen, før du bruker kondomet.

2. Klem luften ut av kondomet med tommel og pekefinger. Før du har intim kontakt mellom deg og din partner, rull kondomet på den erigerete penisen for å forhindre graviditet eller spredning av seksuelt overførbare infeksjoner.
3. Dobbeltsjekk at kondomet sitter som det skal.

4. Rett etter utløsning dras penis ut, mens kondomet holdes forsiktig på plass ved penisroten slik at sæden ikke renner ut.
5. Kontakt legen din hvis du bruker legemidler (f.eks. salve) som ved eventuell kontakt med kondomet kan innebære en risiko for nedsatt funksjon.

6. Hvis kondomet sprerker under bruk, kontakt helsestjenesten innen 72 timer.

## Sikkerhetsinformasjon

Kondom er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot både graviditet og seksuelt overførbare sykdommer. Kondom brukes av seksuelt aktive personer som prevensjonsmiddel og/eller for å forebygge seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) som HIV og andre varlige kjønns sykdommer.

Hvis du ønsker å bruke ekstra glidemiddel, anbefales vatten- eller silikonbaserede glidemidler. Oljebaserede produkter (f.eks. babyolie, vaselin og enkelte pessarer) kan skade kondomet. Opbevares utilgjengelig for barn.

## Kontraindikasjoner

Kondomet skal ikke brukes hvis graviditet er ønsket, eller hvis det foreligger allergi mot lateks, silikonolie eller noen av smaktilsetningene som brukes. Producenten och den kompetente myndigheten skall informeras om enhver allvarig händelse som involverer produktet.

Ingen prevensjonsmidler er 100% sikre.

När du köper RFSUs produkter, bidrar du till arbetet med sexualupplysning och mänskliga rättigheter i Norden och stora delar av världen.



**S:** Läs bipskedsedeln före användning. **N/DK:** Les pakningsvedlegget før bruk/ Læs indlæggssedlen før brug. **FI:** Lue käyttöohjeet.



**S:** Förvaras på en torr plats. **N/DK:** Opbevares/opbevares på et tørt sted. **FI:** Säilytä kuivassa paikassa.



**S:** Endast för engångsbruk. **N/DK:** Må ikke oppbevares/opbevares direkte sollys. **FI:** Pidä poissa suorausta auringonvalosta.



**S:** Innehåller latex (naturgummi). Kan orsaka allergiska reaktioner, i värsta fall anafylaktisk chock. **N/DK:** Inneholder/indeholder latex (naturgummi). Kan forårsake/forårsager allergiske reaktioner/reaktioner, og i værste fald/værste fald anafylaktisk sjokk/chok. **FI:** Sisältää lateksia (luonnonkumia). Voi aiheuttaa allergisia reaktioita, pahimmassa tapauksessa anafylaktisen šokin.



**S:** Tillverkare. **N/DK:** Produzent/ Fabrikant. **FI:** Valmistaja.



**S:** Använd inte om det yttre höjlet har synliga skador. Släng isåfall kondomen och använd en ny från en oskadad förpackning.

**N/DK:** Må ikke brukes/bruges hvis innpakningen/indpakningen har synlige skader. I så fall/fald skal du kaste/kassere kondomet og bruke/bruge et nytt/nytt et fra en uskadet innpakning/ubeskadiget indpakning. **FI:** Älä käytä, jos kondomin kääre on selvästi vaurioitunut, hävitä kondomi ja ota käyttöön uusi vahingoittumattomasta pakkauksesta.



**S:** Medicinteknisk produkt. **N/DK:** Medicinsk/Medicinsk produkt. **FI:** Lääkinnällinen laite.



**S:** Innehåller latex (naturgummi). Kan orsaka allergiska reaktioner, i värsta fall anafylaktisk chock. **N/DK:** Inneholder/indeholder latex (naturgummi). Kan forårsake/forårsager allergiske reaktioner/reaktioner, og i værste fald/værste fald anafylaktisk sjokk/chok. **FI:** Sisältää lateksia (luonnonkumia). Voi aiheuttaa allergisia reaktioita, pahimmassa tapauksessa anafylaktisen šokin.

**rfsu**  
FOR THE FREEDOM  
OF EVERY BODY

# ENJOY FREEDOM

We believe something better is ahead. A world where you are free to express your sexuality, love who you want, and decide over your body. That's a struggle worthwhile.

Since 1933, we have been working to make it real. And we won't stop. Not until we get there.

By choosing RFSU products you support our ongoing work for sexual and human rights. For a world of greater freedom, of every body.

[www.rfsu.com](http://www.rfsu.com)

RFSU AB, Box 1279,  
Färogatan 33, 164 51  
Kista, Sverige, [www.rfsu.com](http://www.rfsu.com).




Kasta ej i toaletten. Ikke kast/smid i toalettet/toiletten. Älä huuhdo viemäriin.




## PROFIL/MAGIC

**S:** Profil är kondomer med insväggt topp för bäst passform och ökad känsla. **N/DK:** Profil är kondomer med insvninghet/indsnævret tupp/sprids för bedre passform og økt/øget følsomhed/følelse. **FI:** Magic-kondomi puristaa parhaasta paikasta ja lisää tuntoherkkyyttä.

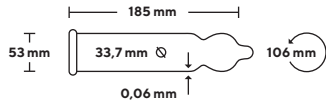


## THIN

**S:** Thin är tunna kondomer för en närmare känsla, nästan som utan. **N/DK:** Thin er tynde/tynde kondomer for en nærmere/tættere følelse, nesten som uten/uden. **FI:** Thin-kondomi on hyvin ohut – lähemmäksi et päase.

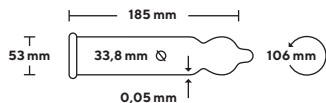


## SENSUAL

**S:** Sensual är kondomer med knottor på för ökad njutning som gör det skönare för båda. **N/DK:** Sensual er kondomer med knudrer/knoppar som gir økt/øget nytelse for begge. **FI:** Sensual-kondomi pinta lisää nautintoa ja on molempien mieleen.

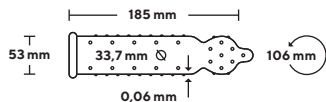


## GRANDE

**S:** Grande är extra rymliga och säkra kondomer med generös form som ger bättre passform och känsla. **N/DK:** Grande er ekstra romslige/rummelige og sikre kondomer med avrundet form som gir bedre passform og følelse/følsomhed. **FI:** Grande on tavallista kondomia tilavampi, mikä takaa paremman istuvuuden ja tunteen.

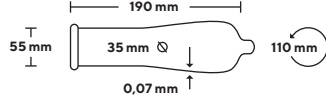


## GRANDE XL

**S:** Grande XL är extremt rymliga kondomer med extra generös form som ger bättre passform och känsla. **N/DK:** Grande XL er ekstra romslige/rummelige kondomer med en extra generös form som gir bedre passform og følelse. **FI:** Grande XL on hyvin tilava kondomi, jonka pidempyi ja leveämpi muotoilu takaa paremman istuvuuden ja tunteen.

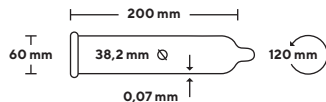


## TIGHT

**S:** Tight är kondomer med en tätt passform. **N/DK:** Tight er kondomer med en tettsettende/tætsiddende passform. **FI:** Tight-kondomi on suunniteltu mukavan tiukaksi.

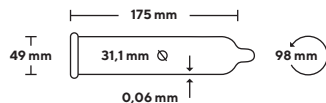

## BEYOND THIN

**S:** Beyond Thin är sensationellt tunna kondomer som ger en optimal hudnära naturlig och skön känsla – nästan som utan. **N/DK:** Beyond Thin er sensasjonelt/sensationelt tynde/tynde kondomer som gir/giver en optimal naturlig og deilig/skøn nær huden opplevelse – nesten som uten/uden. **FI:** Beyond Thin on seitonohut kondomi, joka takaa ainutlaatuisen läheisyyden ja luonnollisen kosketuksen – melkein kuin ilman.

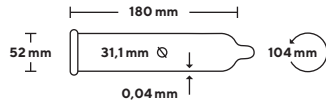

## ENJOY

**S:** Enjoy är en mix av olika kondomer för dig som vill prova och känna dig för. **N/DK:** Enjoy er en mix av ulike/forskellige kondomer for deg/dig som vil prøve og føle deg/dig frem. **FI:** Enjoy on sekoitus kondomeja niille, jotka haluavat kokeilla ja tuntea tiensä.

## TASTY


**S:** Mix av de populäraste kondomerna med arom för doft och smak – för dig som vill stimulera fler sinnen än ett: 1st Profil Juicy Grape, 1st Profil Banana split, 2st Sensual Honey Melon, 2st Sensual Cola, 2st Regular Strawberry and 2st Regular Vanilla.

**N/DK:** Mix av/af de mest populære kondomene med aroma for lukt/duft og smak/smag. For deg/dig som vil ønsker at stimulere flere sanser enn en: 1 stk Profil Juicy Grape, 1 stk Profil Banana Split, 2 stk Sensual Honey Melon, 2 stk Sensual Cola, 2 stk Regular Strawberry og 2 stk Regular Vanilla.

**FI:** Lajitelma suosituimpia kondomeja erilaisilla tuoksu- ja maku-aromeilla sinulle, jotka haluat stimuloida useampia aisteja: 1 kpl Profil Juicy Grape, 1 kpl Profil Banana Split, 2 kpl Sensual Honey Melon, 2 kpl Sensual Cola, 2 kpl Regular Strawberry ja 2 kpl Regular Vanilla.

## 17006

**S:** Transparent, rak och slät kondom utan behållare och glidmedel med arom. **N/DK:** Transparent, rett/lige og glatt kondom uten/uden beholder/reservoir og glidemiddel/glidecreme. **FI:** Läpinäkyvä, suora kondomi ilman säiliötä ja liukasetta.

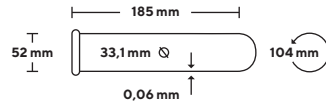

## SENSITIVE

**S:** Sensitive är extra tunne och luktfria plastkondomer som leder kroppsvärme och ger en naturlig känsla. Kan användas av latexallergiker. **N/DK:** Sensitive er ekstra tynde og luktfrie/lugtfrie plastkondomer som leder kroppsvärme. **FI:** Sensitive-kondomi on erittäin ohut ja hajuton. Kondomi välittää kehon lämpöä luonnollisella tavalla ja sopii myös kumi- ja lateksiallergioille.

