

NOTE: The matters of overprint, knock-out, trapping etc. is not taken into consideration. The prepress division have full responsibility for the technical details of printing. All colours shown in these files are digital representations and may not reflect the true printed colours. © Copyright Designkontoret Silver 2016

57.75 mm
57.75 mm
231 mm
57.75 mm
57.75 mm

130 mm

SWEET

SE: Mix av de populäraste kondomerna med arom för doft och smak - för dig som vill stimulera fler sinnen än ett: 1st Profil/Magic Juicy Grape, 1st Profil/Magic Banana split, 1st Thin Pina Colada, 1st Thin Raspberry, 1st Sensual Honey Melon, 1st Sensual Cola, 1st Regular Strawberry och 1st Regular Vanilla. NO/DK: Mix av/af de mest populära kondomerna med aroma for lukt/doft og smak/smag. For deg/dig som vil/ønsker at stimulere flere sanser enn en: 1stk Profil Banana split, 1stk Thin Pina Colada, 1stk Thin Raspberry, 1stk Sensual Honey Melon, 1stk Sensual Cola, 1stk Regular Strawberry og 1stk Regular Vanilla. FI: Lajitelma suosituimpia kondomeja erilaisilla tuoksu- ja makuomilla sinulla, joka haluat stimuloida useampia aisteja: 1kpl Magic Juicy Grape, 1kpl Magic Banana Split, 1kpl Thin Pina Colada, 1kpl Thin Raspberry, 1kpl Sensual Honey Melon, 1kpl Sensual Cola, 1kpl Regular Strawberry ja 1kpl Regular Vanilla.



SE: Innehåller latex (naturgumm). Kan orsaka allergiska reaktioner, i värsta fall anafylaktisk chock. NO/DK: Inneholder/indeholder latex (naturgumm). Kan forårsake/forårsage allergiske reaksjoner/reaktioner, og i verste fall/værste fald anafylaktisk sjokk/chok. FI: Sisältää lateksia (luonnonkumiä). Voi aiheuttaa allergisia reaktioita, pahimmassa tapauksessa anafylaktisen sokin.

SE: Medicinteknisk produkt. NO/DK: Medicinsk/Medicinsk produkt. FI: Lääkinnällinen laite.

SE: Endast för engångsbruk. Återanvändning kan öka risken för fel eller infektion. NO/DK: Kun til engangsbruk/engangsbrug. Gjentbrug/gerbrug kan øke/øge risikoen for fejl/føl eller infektion/infektion. FI: Käytettävä kerran. Uudelleen käytettyä voi lisätä vikojen tai infektion riskiä.

SE: Förvaras ej i direkt solljus. NO/DK: Ikke oppbevares/opbevares i direkte sollys. FI: Pidä poissa suorasta auringovalosta.

SE: Använd inte om det yttre höljiet har synliga skador. Sätt isäfall kondomen och använd en ny från en oskadad förpackning. NO/DK: Må ikke brukes/bruges hvis impakningen/indpakningen har synlige skader. I så fall, fald skal du kaste/kassere kondomet og bruke/bruge et nytt/nytt et fra en uskadedt innpakning/ubeskadiget indpakning. FI: Älä käyttää, jos kondomin kääri on selvästi vaurioitunut, hävitä kondomi ja ota käyttöön uusi vahingoittumattomasta pakkauksesta.

SE: Förvaras på en torr plats. NO/DK: Oppbevares/opbevares på et tørt sted. FI: Säilytä kuivassa paikassa.

SE: Förvaras oäktmligt för barn. NO/DK: Oppbevares utilgjengelig for barn/barn. FI: Pidä pois lapsen ulottuvilta.

SE: Att använda kondom



1. Hantera kondomerna försiktigt. Öppna förpackningen som teckningen visar. Undvik skarpa föremål, t ex vassa naglar, smycken mm, vid hantering och öppning. Rulla först upp kondomen en bit så att det syns tydligt åt vilket håll den skall rullas på.

2. Kläm behållaren mellan tumme och pekfinger för att få bort luft. Innan intim kontakt sker mellan penis och din partner, rulla på kondomen på den erigerade penisen för att förhindra graviditet eller spridning av sexuellt överförbara infektioner.

3. Stanna upp och kontrollera att kondomen sitter på plats.

4. Direkt efter utlösningen dras penis ut och kondomen hålles noga på plats vid penisroten så att ingen sperma rinner ut.

5. Konsultera läkare om du tar något läkemedel (t ex salva) som vid eventuell kontakt med kondomen kan innebära någon risk för nedsatt funktion.

6. Om kondomen spricker vid användning, kontakta sjukvården inom 72h.

Kondom är det enda preventivmedel som skyddar mot både graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar. När du använder extra glidmedel ska det vara vatten- eller silikonbaserat. RFSU har ett brett sortiment att utgå ifrån. Använd inte oljebaserade varianter som t ex barnolja eller vaselin.

När du köper RFSUs produkter bidrar du till arbetet med sexualupplysning och mänskliga rättigheter i Norden och stora delar av världen. Inget preventivmedel är 100% säkert.

NO: Å bruke kondom

1. Vær forsiktig når du åpner forpakningen. Pakningen åpnes som vist på tegningen. Ikke bruk skarpe gjenstander, f.eks lange negler, smykker osv., når du skal åpne forpakningen. Rull ut litt først slik at det blir tydelig hvilken vei det skal rulles på.

2. Kläm luften ut av kondomet med tommel og pekefinger. Før du har intim kontakt mellom deg og din partner, rull kondomet på den erigerte penisen for å forhindre graviditet eller spredning av seksuelt overførbare infeksjoner.

3. Dobbeltsjekk at kondomet sitter som det skal.

4. Rett etter utløsning dras penis ut, mens kondomet holdes forsiktig på plass ved penisroten slik at sæden ikke renner ut.

5. Kontakt legen din hvis du bruker legemidler (f.eks. salve) som ved eventuell kontakt med kondomet kan innebære en risiko for nedsatt funksjon.

6. Hvis kondomet sprækker under bruk, kontakt helsestjenesten innen 72 timer.

Kondom er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot både uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer. Hvis du bruker ekstra glidemiddel skal det være vann- eller silikonbasert. RFSU har et bredt utvalg glidemidler å velge fra. Ikke bruk oljebasert glidemiddel som f.eks. babyolje eller vaselin.

Når du kjøper RFSUs produkter bidrar du til arbeidet med sexualupplysning og menneskerettigheter i Norden og i store deler av verden. Ingen prevensjonsmiddelet er 100% sikre.

SE: Kasta ej i toaletten NO/DK: Ikke kast/smid i toaletter/toiletter FI: Älä huuhdo viemäriin.

DK: Anvendelse af kondom

1. Vær forsigtig når du åbner emballagen. Emballagen åbnes som vist på tegningen. Undgå skarpe genstande, såsom skarpe negle, smykker osv., når du håndterer og åbner kondomet. Rul kondomet en smule ud, så man tydeligt ser, hvilken vej det skal rulles på.

2. Kläm luften ud af kondomet's reservoir med tommel- og pegefingern. Inden du og din partner har intim kontakt, skal du rulle kondomet på den erigerede penis for at forhindre graviditet eller spredning af seksuelt overførbare infektioner.

3. Dobbeltsjek at kondomet sidder som det skal.

4. Umiddelbart efter udløsning trækkes penis ud, og kondomet holdes forsigtigt på plads ved roden af penis, så sæden ikke løber ud.

5. Kontakt din læge, hvis du bruger lægemidler (f.eks. salve), som ved eventuel kontakt med kondomet kan indebære risiko for nedsat funktion.

6. Hvis kondomet brister under brug, skal du kontakte din læge inden for 72 timer.

Kondom er det eneste præventionsmiddel, som beskytter mod både graviditet og seksuelt overførte sygdomme. Når du bruger glidcreme, skal den være vandbaseret eller silikonebaseret. RFSU har et bredt udvalg af glidcremer at vælge fra. Brug ikke oljebaserede glidcremer som f.eks. babyolie, vaseline el. lign.

Når du køber RFSUs produkter, bidrager du til arbejdet med seksualoplysning i Norden og store dele af verden. Intet præventionsmiddel er 100% sikkert.

FI: Näin käyttää kondomia

1. Käsittele kondomia varovaisesti. Avaa pakkaus piirroksen mukaisesti. Vältä kondomin käsittelyä ja kääreen avaamisen aikana teräviä esineitä, kuten teräviä kynsiä, koruja jne. Rullaa kondomia hieman auki varmistaaksesi oikea avautumissuunta.

2. Puhdista lima pois kondomiin kärtästä peukalolla ja etusormella. Ennen peniksen ja kumpansisi välillä intiimiä kosketusta, rullaa kondomi erikössä olevaan penikseen estääksesi raskaus tai seksitautilien leviämisen. Varo raapimasta kondomia kynsillä.

3. Tarkista, että kondomi on asetettu hyvin paikalleen.

4. Välittömästi siemensyöksyn jälkeen penis vedetään ulos ja kondomia pidetään varovasti paikallaan peniksen juuresta, jotta siemensettä ei valu ulos.


5. Konsultoi lääkäriä, jos käytät lääkkeitä (esim. voidetta), jotka voivat joutuessaan kosketuksiin kondomin kanssa heikentää sen toimintakykyä.

6. Jos kondomi hajooa käytössä, ota yhteyttä terveydenhuoltoon 72 tunnin kuluessa.

Kondomi on ainoa ehkäisyväline, joka suojaa sekä ei-toivotulta raskaudelta että tarttuvilta seksitauteilta. Kun käytät liukuvoitetta, on sen oltava vesi- tai silikonipohjista. RFSU:n laajasta valikoimasta löydät useita erilaisia liukuvoiteita. Älä käytä öljypohjaisia liukuvoiteita kuten vaseliinia, hoito- tai hierontajäilyä tai ihovoitetta.

Ostessaasi RFSU:n tuotteita tuet seksuaalikasvatus- ja ihmisoikeustyötä Pohjoismaissa ja muualla maailmassa. Yksikään ehkäisyväline ei takaa 100% varmuutta.

Distributør: RFSU Norge AS, Oslo
Conaxess Trade Denmark, København
Suomen RFSU Oy, Helsinki



ENJOY FREEDOM

Enjoy freedom is about making your own choices. Let the fire of your unique sexuality heat up your life and immerse you in the vibrant energy of being intensely alive. When you give yourself the gift of freedom, you also give it to others.

www.rfsu.com


While having sex with RFSU condoms know that your are supporting body rights all over the world.

FRONT

BACK


PROFIL/MAGIC

SE: Profil är kondom med insvägad topp för bäst passform och ökad känsla. NO/DK: Profil er kondom med insvinget/indsnavret topp/spids for bedre passform og økt/øget følsomhet/følelse. FI: Magic-kondomi paristaa parhaasta paikasta ja lisää tuntoherkkyyttä.

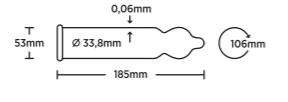


THIN

SE: Thin är tunnare kondomer för en närmare känsla, nästan som utan. NO/DK: Thin er tynne/tynde kondomer for en nærmere/tættere følelse, nesten som uten/uden. FI: Thin-kondomi on hyvin ohut - lähemmäksi et pätsä.

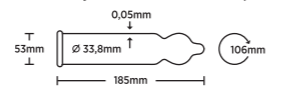


SENSUAL/NÄKKEN

SE: Sensual är kondomer med knottor för ökad njutning som gör det skönare för båda. NO/DK: Sensual er kondomer med knudrer/knopper som gir økt/øget nytelse for begge. FI: Sensual-kondomin juompinta lisää nautintoa ja on molempien mieleen.

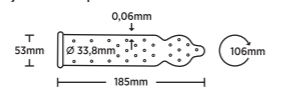


GRANDE

SE: Grande är extra rymliga och säkra kondomer med generös form som ger bättre passform och känsla. NO/DK: Grande er ekstra romslige/rummelige og sikre kondomer med avrundet form som gir bedre passform og følelse/følelse. FI: Grande on tavallista kondomia tilavampi, mikä takaa paremman istuvuuden ja tunteen.




GRANDE XL

SE: RFSU Grande XL är extremt rymliga kondomer med extra generös form som ger bättre passform och känsla. NO/DK: RFSU Grande XL er ekstra romslige/ruumlige kondomer med en ekstra generøs form som gir bedre passform og følelse. FI: RFSU Grande XL on hyvin tilava kondomi, jonka pidempi ja leveämpi muotoilu takaa paremman istuvuuden ja tunteen.

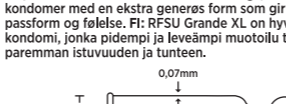


TIGHT

SE: Tight Slim fit är kondomer med en tätt passform. NO/DK: Tight Slim fit er kondomer med en tettstøtende/tætsiddende passform. FI: Tight Slim fit -kondomi on suunniteltu mukavan tiukaksi.

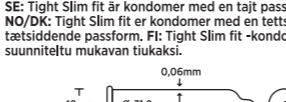


REGULAR

SE: Rak, ofärgad kondom med slät yta, behållare och glidmedel med arom. NO/DK: Rett/lige, ufarget/ufarvet kondom med glatt overflate, beholder/reservoir og glidemiddel/glidcreme med aroma. FI: Suora ja sileäpintainen makuukondomi. Makuu mansikka ja vanilja.

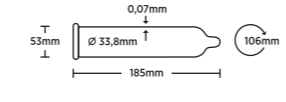


17006

SE: Transparent, rak och slät kondom utan behållare och glidmedel. NO/DK: Transparent, rett/lige og glatt kondom uten/uden beholder/reservoir og glidemiddel/glidcreme. FI: Läpinäkyvä, suora kondomi ilman säiliötä ja liukastetta.

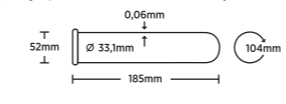


SENSITIVE



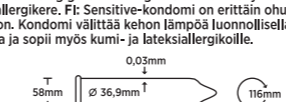



SE: Sensitive är extra tunn och luktfrja plastkondomer som leder kroppsvärme och ger en naturlig känsla. Kan användas av latexallergiker. NO/DK: Sensitive er ekstra tynne/tynde og luktfrie/luktfrje plastkondomer som leder kroppsvärme og gir en naturlig følelse. Kan benyttes av latexallergikere. FI: Sensitive-kondomi on erittäin ohut ja hajuuton. Kondomi välittää kehon lämpöä luonnollisella tavalla ja sopii myös kumi- ja lateksiallergioille.





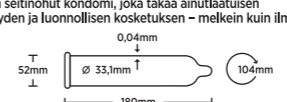

BEYOND THIN

SE: Beyond Thin är sensationellt tunnare kondomer som ger en optimal hudnära naturlig och skön känsla - nästan som utan. NO/DK: Beyond Thin er sensasjonell/sensationelt tynne/ tynde kondomer som gir/giver en optimal naturlig og deilig/ skan nær huden opplevelse - nesten som uten/ uden. FI: Beyond Thin on selinohut kondomi, joka takaa ainutlaatuisen läheisyyden ja luonnollisen kosketuksen - melkein kuin ilman.

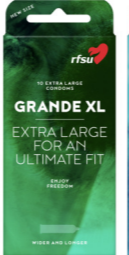

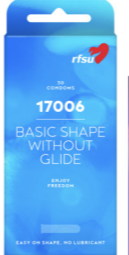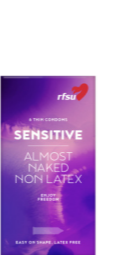Art. Nr. 1080N14
v23012
RFS-239-04 Alta.45 Trysken

CE
2862