

5 Användarinformation

1. Hantera kondomen försiktigt. Öppna förpackningen som teckningen visar. Undvik skarpa föremål, t.ex. vassa naglar, smycken mm, vid hantering och öppning. Rulla först upp kondomen en bit så att det syns tydligt åt vilket håll den skall rullas på. Kontrollera utgångsdatum på kondomslaget innan du använder kondomen.

2. Kläm behållaren mellan tumme och pekfinger för att få bort luft. Innan intimitet kontakt sker mellan penis och din partner, rulla på kondomen på den erigerade penis för att förhindra graviditet eller spridning av sexuellt överförbara infektioner.

3. Stanna upp och kontrollera att kondomen sitter på plats.

4. Direkt efter utlösningen dras penis ut och kondomen hålls nog på plats vid penisroten så att ingen sperma rinner ut.

5. Konsultera läkare om du tar något läkemedel (t.ex. salva) som vid eventuell kontakt med kondomen kan innebära någon risk för nedsatt funktion.

6. Om kondomen spricker vid användning, kontakta sjukvården inom 72h.

Säkerhetsinformation

Kondom är det enda preventivmedel som skyddar mot både graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar. Kondom används av sexuellt aktiva personer som ett preventivmedel och/eller vid förebyggande av sexuellt överförbara infektioner (STI) som HIV och andra vanliga sexuella sjukdomar.

Om du önskar använda extra glidmedel rekommenderas vatten- eller silikonbaserat glidmedel. Oljebaserade produkter (t.ex. barnolja, vaselin och vissa pessar) kan skada kondomen. Förvaras ömtåmligt för barn.

Kontraindikationer

Kondomen ska inte användas om graviditet önskas eller om allergi förekommer mot latex, silikonolja eller någon av ingående smärkämnen. Tillverkaren och den behöriga myndigheten skall informeras om alla allvariga tillbud som inträffat med produkten.

Inget preventivmedel är 100% säkert.

När du köper RFSU:s produkter bidrar du till arbetet med sexualupplysning och mänskliga rättigheter i Norden och stora delar av världen.

Bruggerinformation

1. Vær forsigtig når du åbner emballagen. Emballagen åbnes som vist på tegningen. Undgå skarpe genstande, såsom skarpe negle, smykker osv., når du håndterer og åbner kondomet. Rul kondomet en smule ud, så man tydeligt ser, hvilken vej det skal rulles på. Tjek udløbsdatoen på kondomindpakningen, før du bruger kondomet.

2. Klem luften ud af kondomets reservoir med tommel- og pegefinger. Inden du og din partner har intim kontakt, skal du rulle kondomet på den erigerede penis for at forhindre graviditet eller spredning af seksuelt overførbare infektioner.

3. Dobbeltsjek at kondomet sidder som det skal.

4. Umiddelbart efter udløsning trækkes penis ud, og kondomet holdes forsigtigt på plads ved penisroten så, så sæden ikke løber ud.

5. Kontakt på læge, hvis du bruger lægemidler (f.eks. salve) som ved eventuel kontakt med kondomet kan indebære risiko for nedsat funktion.

6. Hvis kondomet bryder under brug, skal du kontakte din læge inden for 72 timer.

Sikkerhedsinformation

Kondomer er den eneste præventionsmetode, der beskytter mod både graviditet og seksuelt overførbare sygdomme. Kondomer bruges af seksuelt aktive mennesker som præventionsmiddel og/eller til forebyggelse af seksuelt overførbare infektioner (STI) som HIV og andre almindelige seksuelle sygdomme.

Hvis du ønsker at bruge ekstra glidcreme, anbefales vand- eller silikonbaserede glidcreme. Oliebaserede produkter (f.eks. babyolie, vaselin og enkelte pessarer) kan beskadige kondomet. Opbevares utilgængeligt for børn.

Kontraindikationer

Kondomet må ikke bruges, hvis der ønskes graviditet, eller hvis der er allergi overfor latex, silikonolie eller nogen af de anvendte aromastoffer. Producenten og den kompetente myndighed skal informeres om enhver alvorlig hændelse, der involverer produktet.

Inet præventionsmiddel er 100% sikkert.

Når du køber RFSU's produkter, bidrager du til arbejdet med seksualoplysning og menneskerettigheder i Norden og store dele af verden.



6 Käyttöohjeet

1. Käsittele kondomia varovaisesti. Avaa pakkaus piirroksen mukaisesti. Vältä kondomin käsittelyä ja käärteen avaamisen aikana teräviä esineitä, kuten teräviä kynsiä, koruja jne. Rullaa kondomia hieman auki varmistaksesi oikean avaruussuunta. Tarkista kondomin kaläireessä oleva viimeinen käyttöpäivä ennen kondomin käyttöä.

2. Purista ilma pois kondomin kärjestä peukalolla ja etusormella. Ennen peniksen ja kumpipansin välistä intiimiä kosketusta, rullaa kondomi eriteksiä olevaan penikseen estääksesi raskaus tai seksitautien leviäminen. Varo raapimasta kondomia kynsillä.

3. Tarkista, että kondomi on asetettu hyvin pakilloleen.

4. Välttämättä siemensyöksyn jälkeen penis vedetään ulos ja kondomi pidetään varovasti paikallaan peniksen juuresta, jotta siemenneste ei valu ulos.

5. Konsultoi lääkärää, jos käytät lääkkeitä (esim. voidetta), jotka voivat johtuaan kosketuksiin kondomin kanssa heikentää sen toimintakykyä.

6. Jos kondomi hajoaa käytössä, ota yhteyttä terveydenhuoltoon 72 tunnin kuluessa.

Turvallisuustietoja

Kondomi on ainoa ehkäisy menetelmä, joka suojaa sekä raskaudelta että seksitauilta. Seksuuuteen osallistuvien ihmisten käyttäytymisenä ja sitä sukupuoliteite tautien tautien, kuten HIV:n ja muiden leikkien seksitautien, ehkäisyä.

Jos haluat käyttää ylimääräistä liukuvoidetta, suositellaan vesi- tai silikonipohjaisia liukuvoidetta. Öljypohjaiset tuotteet (esim. vauvoöljy, vaseliini ja jotkut voiteet) voivat vahingoittaa kondomia. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Vasta-aiheet

Kondomia ei saa käyttää, jos halutaan raskautta tai jos on allerginen lateksille, silikonijäljelle tai jollekin käytetyille aroamiaineille. Valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava kaikista tuotteen aiheuttamasta vakavista vaaratilanteista.

Mikään ehkäisyväline ei ole 100-prosenttisen turvallinen.

RFSU:n tuotteita ostamalla tuet seksuaalivalitusta ja ihmisoikeustöitä Pohjoismaissa ja muualla maailmassa.

N Brukerinformasjon

1. Vær forsiktig når du åpner forpakningen. Pakningen åpnes som vist på tegningen. Ikke bruk skarpe gjenstander, f.eks. lange negler, smykker o.l., når du skal åpne forpakningen. Rull først ut kondomet et stykke, slik det blir tydelig hvilken vei det skal rulles på. Sjekk utløpsdatoen på kondominnpakningen før du bruker kondomet.

2. Klem luften ut av kondomet med tommel og pekefinger. Før du har intim kontakt mellom deg og din partner, rull kondomet på den erigerte penis for å forhindre graviditet eller spredning av seksuelt overførbare infeksjoner.

3. Dobbeltsjekk at kondomet sitter som det skal.

4. Rett etter utløsning dras penis ut, og kondomet holdes forsiktig på plads ved penisroten så, så sæden ikke renner ut.

5. Kontakt legen din hvis du bruker legemidler (f.eks. salve) som ved eventuell kontakt med kondomet kan innebære en risiko for nedsatt funksjon.

6. Hvis kondomet sprækker under bruk, kontakt helsestasjonen innen 72 timer.

Sikkerhetsinformasjon

Kondom er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot både graviditet og seksuelt overførbare sykdommer. Kondom brukes av seksuelt aktive personer som prevensjonsmiddel og/eller til forebyggelse av seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) som HIV og andre vanlige kjønnsykdommer.

Hvis du ønsker å bruke ekstra glidemiddel, anbefales vann- eller silikonbaserte glidemidler. Oljebaserede produkter (f.eks. babyolje, vaselin og enkelte pessarer) kan skade kondomet. Opbevares utilgjengelig for barn.

Kontraindikasjoner

Kondomet skal ikke brukes hvis graviditet er ønsket, eller hvis det foreligger allergi mot lateks, silikonolie eller noen av smaktsetningene som brukes. Producenten og den kompetente myndigheten skal informeres om enhver alvorlig hendelse som involverer produktet.

Ingen prevensjonsmiddel er 100% sikre.

Når du kjøper RFSU's produkter, bidrar du til arbeidet med seksualoplysning og menneskerettigheter i Norden og i store deler av verden.



S: Läs bipacksedeln före användning. **N/DK:** Les pakningsvedlegget før bruk/ Læs indlægssedlen før brug. **FI:** Lue käyttöohjeet.



S: Förvaras på en torr plats. **N/DK:** Oppbevares/opbevares på et tørt sted. **FI:** Säilytä kuivassa paikassa.



S: Förvara ej i direkt solljus. **N/DK:** Må ikke oppbevares/opbevares i direkte sollys. **FI:** Pidä pois suoraan auringonvalosta.



S: Endast för engångsbruk. Återanvändning kan öka risken för fel eller infektion. **N/DK:** Kun til engangsbrug/ engangsbrug. Gjenbruk/ genbrug kan øke/øge risikoen for feil/feil eller infeksjon/ infektion. **FI:** Kertakäyttöön. Uudelleen käytettynä voi lisätä vikojen tai infektion riskiä.



S: Tillverkare. **N/DK:** Produzent/ Fabrikant. **FI:** Valmistaja.



S: Använd inte om det yttre höljiet har synliga skador. Säng i så fall kondomen och använd en ny från en oskadad förpackning. **N/DK:** Må ikke brukes/ bruges hvis innpakningen/ indpakningen har synlige skader. I så fall/fald skal du kaste/kassere kondomet og bruke/ bruke et nytt/nytt et fra en uskadet innpakning/ ubeskadiget indpakning. **FI:** Älä käyttää, jos kondomin kääre on selvästi vaurioitunut, hävitä kondomi ja ota käyttöön uusi vahingoittumattomasta pakkauksesta.



S: Mediceinteknisk produkt. **N/DK:** Medisinsk/Medicinsk produkt. **FI:** Lääkinnällinen laite.



S: Innehåller latex (naturgummi). Kan orsaka allergiska reaktioner, i värsta fall anafylaktisk chock. **N/DK:** Inneholder/indeholder latex (naturgummi). Kan forårsake/forårsage allergiske reaksjoner/reaktioner, og i verste fall/værste fald anafylaktisk sjokk/chock. **FI:** Sisältää lateksia (luonnonkumia). Voi aiheuttaa allergisia reaktioita, pahimmassa tapauksessa anafylaktisen sokin.

FOR THE FREEDOM OF EVERY BODY

BY CHOOSING RFSU PRODUCTS YOU SUPPORT OUR ONGOING WORK FOR SEXUAL AND HUMAN RIGHTS.



RFSU AB, Box 1279, Färegatan 33, 164 51 Kista, Sverige. www.rfsu.se.



Kasta ej i toaletten. Ikke kast/smid i toalettet/toiletlet. Älä huuhdo viemäriin.



We believe something better is ahead. A world where you are free to express your sexuality, love who you want, and decide over your body. That's a struggle worthwhile.


Since 1933, we have been working to make it real. And we won't stop. Not until we get there.

By choosing RFSU products you support our ongoing work for sexual and human rights. For a world of greater freedom, for every body.

www.rfsu.com


PROFIL/MAGIC

S: Profil är kondomer med insvägdat topp för bäst passform och ökad känsla. **N/DK:** Profil är kondomer med insvingel/indsnåvret tupp/ sprids för bedre passform og økt/løget følelse/het /følelse. **FI:** Magic-kondomi puristaa parhaasta paikasta ja lisää tuntoherkkyyttä.

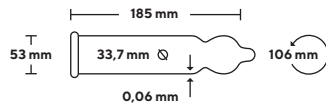


THIN

S: Thin är tunna kondomer för en närmare känsla, nästan som utan. **N/DK:** Thin er tynne/tynde kondomer for en nærmere/tættere følelse, nesten som uten/uden. **FI:** Thin-kondomi on hyvin ohut - melkein kuin ilman.

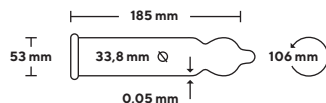


SENSUAL

S: Sensual är kondomer med knottar på för ökad njutning som gör det skönare för båda. **N/DK:** Sensual er kondomer med knuder/knopper som gir økt/løget nytelse for begge. **FI:** Sensual-kondomi pinta lisää nautintoa ja on molempien mieleen.

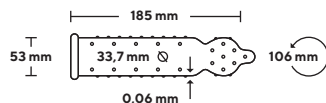


GRANDE

S: Grande är extra rymliga och säkra kondomer med generös form som ger bättre passform och känsla. **N/DK:** Grande er ekstra romslige/rummelige og sikre kondomer med avrundet form som gir bedre passform og følelse/følelse. **FI:** Grande on tavallista kondomia tilavampi, mikä takaa paremman istuvuuden ja tunteen.

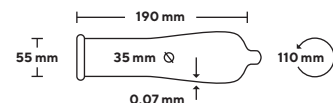


GRANDE XL

S: Grande XL är extremt rymliga kondomer med extra generös form som ger bättre passform och känsla. **N/DK:** Grande XL er ekstra romslige/rummelige kondomer med en extra generös form som gir bedre passform og følelse. **FI:** Grande XL on hyvin tilava kondomi, jonka pidempi ja leveämpi muotoilu takaa paremman istuvuuden ja tunteen.

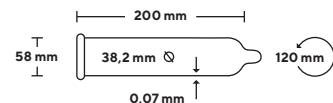


TIGHT

S: Tight är kondomer med en tätt passform. **N/DK:** Tight er kondomer med en tettstittende/tætsiddende passform. **FI:** Tight-kondomi on suunniteltu mukavan tiukaksi.

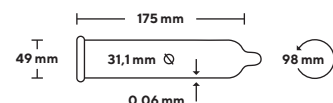

BEYOND THIN

S: Beyond Thin är sensationellt tunna kondomer som ger en optimal hudnära naturlig och skön känsla - nästan som utan. **N/DK:** Beyond Thin er sensasjonelt/sensationelt tynne/tynde kondomer som gir/giver en optimal naturlig og deilig/skøn nær huden opplevelse - nesten som uten/uden. **FI:** Beyond Thin on erittäin ohut kondomi, joka takaa ainutlaatuisen läheisyyden ja luonnollisen kosketuksen - lähemmäksi et pääse.

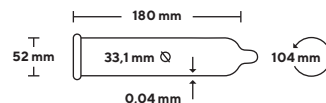

ENJOY

S: Enjoy är en mix av olika kondomer för dig som vill prova och känna dig för. **N/DK:** Enjoy är en mix av ulike/forskellige kondomer for deg/dig som vil prøve og føle deg/dig frem. **FI:** Enjoy on sekoitus kondomeja niille, jotka haluavat kokeilla löytää suosikkinsa.

TASTY

S: Mix av de populäraste kondomerna med arom för doft och smak - för dig som vill stimulera fler sinnen än ett: 1 st Profil Juicy Grape, 1 st Profil Banana Split, 2 st Sensual Honey Melon, 2 st Sensual Cola, 2 st Regular Strawberry och 2 st Regular Vanilla.


N/DK: Mix av/af de mest populære kondomene med aroma for lukt/duft og smak/smag. For deg/dig som vil/ønsker at stimulere flere sanser enn en: 1 stk Profil Juicy Grape, 1 stk Profil Banana Split, 2 stk Sensual Honey Melon, 2 stk Sensual Cola, 2 stk Regular Strawberry og 2 stk Regular Vanilla.

FI: Lajitelma suosituimpia kondomeja erilaisilla tuoksu- ja maku-aromeilla sinulle, joka haluat stimuloida useampia aisteja: 1 kpl Profil Juicy Grape, 1 kpl Profil Banana Split, 2 kpl Sensual Honey Melon, 2 kpl Sensual Cola, 2 kpl Regular Strawberry ja 2 kpl Regular Vanilla.



17006

S: Transparent, rak och slät kondom utan behållare och glidmedel med arom. **N/DK:** Transparent, rett/lige og glatt kondom uten/uden beholder/reservoir og glidemiddel/glidcreme. **FI:** Läpinäkyvä, suora kondomi ilman säiliötä ja liukasetta.

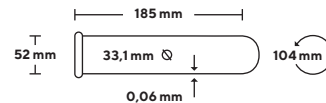

SENSITIVE

S: Sensitive är extra tunna och luktfria plastkondomer som leder kroppsvärme och ger en naturlig känsla. Kan användas av latexallergiker. **N/DK:** Sensitive er ekstra tynne/tynde og luktfrie/luftfrie plastkondomer som leder kroppsvärme og giver en naturlig fornemmelse. Kan anvendes af personer med latexallergi. **FI:** Sensitive-muovikondomi on erittäin ohut ja hajuton. Kondomi välittää kehon lämpöä luonnollisella tavalla ja sopii myös kumi - ja lateksiallergoille.

